




medi

Produktkatalog Phlebologie

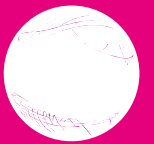

medi. ich fühl mich besser.

KOMPRESSION bei chronischer Venenerkrankung und pAVK/ Diabetes?

Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

Ja, aber sicher!*

mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



mediven® angio

Sicher versorgt bei besonderen Ansprüchen.

Extralange, flache Naht

* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

Die medi Versorgungsampel

Für eine einfache, sichere und indikationsgerechte Versorgung

Schritt 1: Feststellen der Indikation und
Abklärung von Begleiterkrankungen

Schritt 2: Berücksichtigung von patientenindividuellen
Kriterien und Begleiterkrankungen



Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5)

ca. 98 % der über 60-jährigen¹

Klinischer Befund

- Venöser Reflux
- Venöse Hypertonie



Kompressionstherapie mit
mediven® Rundstrick
(z. B. mediven® plus) –
patientenindividuell
versorgen



Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und leichte bis mittelschwere pAVK

ca. 21 % der über 65-jährigen²

Weiterer klinischer Befund^{2,3}

- Schmerzen in den Waden beim Gehen längerer Strecken (sogenannte Schaufensterkrankheit)

Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und Diabetes mellitus Typ 2 / diabetische PNP

ca. 20,5 % der über 60-jährigen⁴

Weiterer klinischer Befund

- Fehlendes Druckempfinden
- Fehlendes Schmerzempfinden



Kompressionstherapie
mit **mediven® angio** –
sicher versorgen

✓ Einzigartiges Produkt

- Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich
- Feste Rippenstruktur
- Extralange, flache Naht

✓ Klinische Studie

- Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- Keine Schädigung der Haut
- Keine Schnürfurchen
- Keine Druckstellen
- Hoher Tragekomfort

Bestätigt für CCL 1 und 2



Chronische Venenerkrankung und fortgeschrittene pAVK



Kontraindikation für
Kompressionstherapie³

Chronische Venenerkrankung und diabetisches Fußsyndrom (DFS)



Keine Versorgung
mit medizinischen
Kompressionsstrümpfen



¹ Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1-14.


² Deutsche Gesellschaft für Angiologie Gesellschaft für Gefäßmedizin. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit.

³ Online veröffentlicht unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/065-003> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

⁴ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

⁵ Nationale Diabetes-Surveillance am Robert Koch-Institut (2019). Diabetes in Deutschland – Bericht der Nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Robert Koch-Institut, Berlin

⁶ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

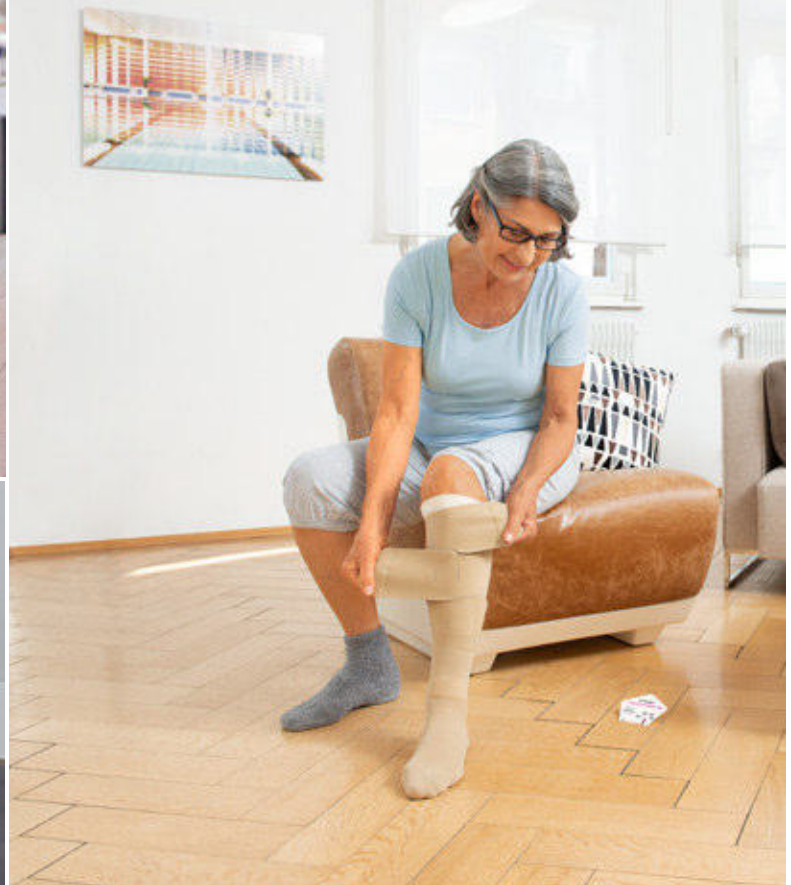

Zweckbestimmungen

circaid® Beinversorgungen:

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Beins.

circaid® Fußoptionen:

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lymphkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels.

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf:

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

medi Bein Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

medi Arm Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsarmstrümpfe.

medi 2in1:

An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener und auch geschlossener Spitze.

mediven® ulcer kit:

Rundgestricktes Kompressionsstrumpfsystem zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

medi travel®:


Rundgestrickter Kompressionsstrumpf der unteren Extremitäten zur physikalischen Thromboseprophylaxe für venengesunde Reisende.

mediven® harmony SL:

Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

mediven® harmony:

Rundgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

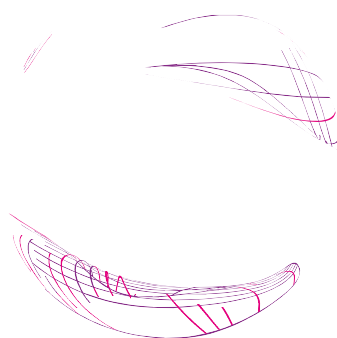

medi World of Compression

**Starke Marke. Umfassendes Produkt-
sortiment. Ganzheitliche Konzepte.**

Die medi World of Compression: Wegweiser für die Zukunft mit über 70 Jahren Kompetenz im Bereich Kompression. Ihr Partner für höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Design. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten und positive Markenerlebnisse schaffen – für Sie und Ihre Kund:innen.

Zufriedene Kund:innen und neue Potenziale

**Phasengerechte Therapie und zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten für mehr
Therapieerfolg**

medi bietet für nahezu jede Indikation die passende Kompressionsversorgung – für jedes Stadium der Therapie. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass Kund:innen ihre Kompression gerne tragen. Profitieren Sie mit medi von hoher partnerschaftlicher Kulanz und hilfreichen Services.

medi World of Compression

medi überzeugt beim Thema Kompression mit einem ganzheitlichen Konzept. Aus diesem Grund können Sie auf medi Produkte vertrauen. Sie sind bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen abgestimmt.

Lernen Sie die medi World of Compression näher kennen! Dafür haben wir Kataloge entwickelt, die sich in Themenbereiche unterteilen. So finden Sie schnell und einfach alle Informationen, die Sie benötigen.

Diese Kataloge gibt es:



Phlebologie

Kompressionstherapie mit mediven Kompressionsstrümpfen oder circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen ist ein wichtiger Baustein für die Therapie venöser Erkrankungen.

Art.-Nr.: 0020965



Lymphologie

Patientenindividuell von der Entstauung bis zur Erhaltung. Mit den circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen in der Entstauungsphase und flachgestrickten mediven Kompressionsstrümpfen in der Erhaltungsphase bietet medi das passende Produkt für nahezu jede:n Patient:in in der Therapie von Lymph- und Lipödem.

Art.-Nr.: 0025090



medi Therapiekonzept Ulcus cruris

Das medi Therapiekonzept Ulcus cruris verbindet die Akutphase mit der Rezidivprophylaxe und begleitet somit die Patient:innen während der gesamten Therapie des „offenen Beins“.

Art.-Nr.: 0050515

6

Patientenindividuelle
und phasengerechte
Versorgung



16

Übersichten circaid®
und mediven®



50

mediven® cotton

Natürlich gut versorgt.



92

mediven® ulcer kit

Zur Versorgung bei
Ulcus cruris venosum

98

Basisversorgung

100 duomed® basic
102 Maxis® MICRO

30

circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives
Kompressionssystem für die
Entstauung



54

mediven® plus

Man erlebt Zuverlässigkeit.



104

mediven® harmony

Rundgestrickter Armstrumpf
in sieben Seriengrößen.

38

mediven® elegance®

Man sieht Schönheit.



58

mediven® active

Der robuste Kompressions-
strumpf für den aktiven Mann.



42

mediven® for men

Der stilsichere Kompressions-
strumpf für den modischen
Business-Look



62

mediven® forte

Man fühlt Schutz.



108

medi travel®

Freiverkäufliche Reise-
strümpfe für Menschen mit
gesundem Venensystem



46

mediven® comfort®

Man spürt Weichheit.

66

mediven® angio

Sicherheit bis in die Fußspitze

72
Sonderausführungen
Rundstrick
Leibteil- und
Zwickelvarianten
Übersicht der lieferbaren
Ergänzungen je nach Qualität

112

medi Zubehör

124

medi Service

Patientenindividuelle und phasengerechte Versorgung mit medi

„medi. ich fühl mich besser.“

Mit diesem Anspruch entwickeln wir indikations-
gerechte Produkte. Passende Hilfsmittel, die bis
ins Detail auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
und individuellen Kriterien von Venenpatient:innen
abgestimmt sind – von der initialen Entstauung
bis zur Langzeittherapie.





Effektiv versorgen, ganzheitlich profitieren

1

Entstauung

circaid® medizinische adaptive Kompressionssysteme in der Entstauungsphase

Kompression ist ein Grundbaustein der leitliniengerechten¹ Therapie bei lymphologischen und phlebologischen Indikationen. circaid medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Sie kommen bei der Entstauung von Lymphödemen, ausgeprägten venösen Ödemen und in der Therapie des Ulcus cruris venosum zum Einsatz. Mit circaid MAK bietet medi eine effektive Option, um das Ödem in der initialen Behandlung zu entstauen.

Effektive Entstauung – einstellen, kontrollieren, nachjustieren

Die erste Phase der Therapie, die Entstauungsphase, hat zum Ziel, angestaute Flüssigkeit im Gewebe zu verringern. In dieser volumeninstabilen Phase kommt es zu deutlichen Umfangsschwankungen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie ist ein Hilfsmittel, das definierte und konsequente Kompression ermöglicht, auch bei sich schnell reduzierenden Umfängen:

- Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind jederzeit anpassbar und sorgen so für eine kontinuierliche Kompression.
- Nach Einweisung durch Fachpersonal ermöglicht die einfache Handhabung den Patient:innen Selbstmanagement und erleichtert die Hygiene.
- Durch das integrierte Built-In-Pressure System (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch von den Patient:innen selbst.

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).



2

Erhaltung

Erhaltung des Therapieerfolgs und Rezidivprophylaxe mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Ist ein ausgeprägtes venöses Ödem entstaut beziehungsweise ist das offene Bein abgeheilt, besteht die Grunderkrankung dennoch fort. Es ist deshalb essenziell, die zugrunde liegende chronisch venöse Insuffizienz (CVI) weiter zu therapieren.

Effektive Erhaltung – optimal versorgt mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Bei der Auswahl der Kompressionstherapie ist neben der Indikation auch die individuelle Ödemeigung und Konstitution der Patient:innen zu berücksichtigen: Je nach Situation kann ein rundgestrickter Kompressionsstrumpf oder ein Ulkus-Strumpfsystem im Anschluss an die Entstauung verordnet werden.

In wenigen Schritten zur patienten-individuellen Versorgung

mediven® Rundstrick – individuelle Patientenversorgung

Material	Leicht (z. B. mediven elegance®)	Mittel (z. B. mediven plus®)	Kräftig (z. B. mediven® forte)
Kriterien			
1. Gewicht			
2. Ödem (Phlebödem)	–	+	++
3. Schweregrad der Erkrankung			

Achtung: Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung!



Die mediven® Beobachtungsstudie belegt: Hohe Akzeptanz und Tragekomfort der mediven® MKS^{*,1,2}

Zahlen, Daten, Fakten zu mediven® Kompressionsstrümpfen^{1,2}

Hohe Akzeptanz

Bis zu **98 %**
der Patient:innen

hatten keine Beschwerden beim
Tragen des MKS*

Tragekomfort

Über **70 %**
der Patient:innen

beurteilten den MKS* als angenehm

Besserung der Beschwerden

Bei bis zu **53,2 %**
der Patient:innen

verbesserten sich die subjektiven
Beschwerden durch den MKS*

Bei **17,7 %**
der Patient:innen

verbesserte sich objektiv der klinische
Befund nach CEAP-Klasse**

Gute Compliance

Bis zu **75,6 %**
der Patient:innen

trugen den MKS* mehrheitlich täglich***

Bis zu **68,4 %**
der Patient:innen

trugen den MKS* von morgens bis abends

* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf


** CEAP = Einteilung der klinischen Ausprägung chronischer Venenerkrankungen

*** Regelmäßige Anwender:innen: täglich oder an mindestens 50 Prozent aller Tage pro Woche

¹ Schwahn-Schreiber C et al. Langzeitbeobachtung zur ambulanten Therapie phlebologischer Erkrankungen mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland – die mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(1):15-24.

² Schwahn-Schreiber C et al. Versorgungsrealität mit medizinischen Kompressionsstrümpfen im ambulanten Bereich. Folgeanalyse der mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(4):207-214.

Die Studie deckt auf: Optimierungsbedarf bei der Versorgung

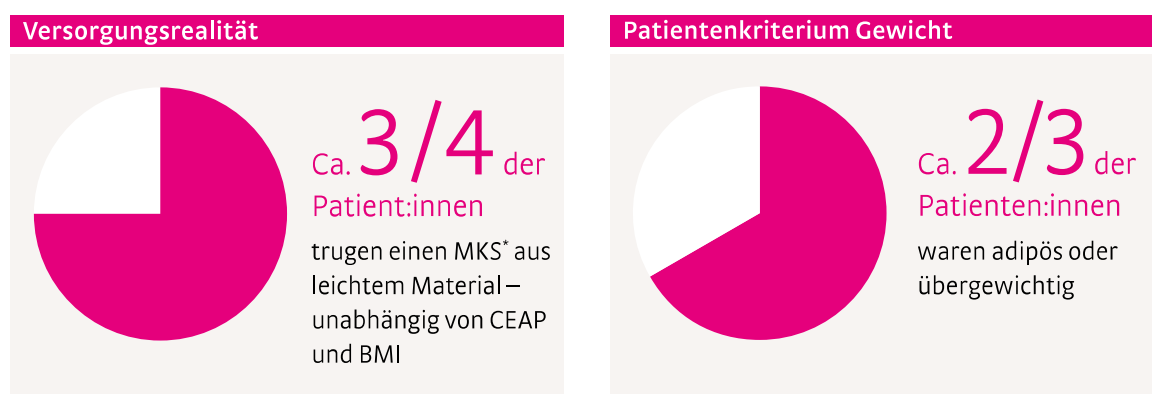

Der Begriff „Material“ umfasst die verschiedenen textilen Charakteristika eines MKS* und wird durch die Festigkeit des Gewebes, die Rigidität und die Elastizität definiert.

Die mediven Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen patientenindividuelle Faktoren nur selten berücksichtigt werden. Obwohl zwei Drittel der Patient:innen übergewichtig oder adipös waren, bekamen 73,8 Prozent Kompressionsstrümpfe aus leichten Materialien verschrieben.

Aus diesem Grund hat medi einen mediven Versorgungskompass (siehe Seite 14) entwickelt, um Sie bei der schnellen und einfachen MKS*-Versorgung zu unterstützen. In nur wenigen Schritten gelingt es Ihnen, einen patientenindividuellen Kompressionsstrumpf zu finden.

Darum empfiehlt medi folgende Vorgehensweise:

Schritt 1: Indikation berücksichtigen (Indikationsübersicht)

Schritt 2: patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen (Versorgungskompass)

* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf

Schritt 1: Phlebologische Indikationsübersicht

medi Kompressionsversorgungen verbessern ...

- venöse Symptome inklusive Schmerzreduktion.
- die Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten.

Folgende Indikationen sollen berücksichtigt werden (höchster Empfehlungsgrad):¹

Indikation			Produkt (CCL)	mediven elegance (1, 2)
Chronische Venenerkrankungen nach CEAP				
C0s		Keine sichtbaren Anzeichen einer venösen Erkrankung		●
C1		Besenreiser, Teleangiektasien, retikuläre Varizen		●
C2		Varikose ohne Zeichen einer CVI C2r Rezidiv Varikose		●
C3		Prävention und Therapie venöser Ödeme		
C4		Prävention und Therapie von Hautveränderungen C4a Pigmentierung, Ekzem C4b Dermatoliposklerose, Atrophie blanche C4c Corona phlebectatica		
C5		Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (UCV), Prävention des UCV-Rezidivs		
C6		Florides UCV C6r Rezidiv eines UCV		
Sonstige				
		Therapie des gemischten Ulcus cruris		
Sonstige chronische Venenkrankheiten				
		Initialphase nach Varikosetherapie		●
		Funktionelle venöse Insuffizienz bedingt durch Adipositas		
Sonstige Ödeme				
		Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft, postoperative Reperfusionsoedeme, posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme, Ödeme infolge Immobilitäten		
Thromboembolie				
		• Oberflächliche Venenthrombose		●
		• Tiefe Beinvenenthrombose		
		• Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom		
		• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen		●
		• Armvenenthrombose		
Andere Indikationen				
		• Entzündliche Dermatosen der Beine		●
		• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft		●

Schritt 2: Der mediven® Versorgungskompass

Einfach patientenindividuell versorgen mit mediven®

Empfehlung:

- Je **höher** das Gewicht,
 - Je **stärker** die Phlebödemneigung,
 - Je **schwerer** die venöse Erkrankung,
 - Je **weicher** das Bindegewebe,
- umso **kräftiger** sollte das Strumpfmaterial sein.
 → Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.

medi Tipp

Sicher versorgen bei Begleiterkrankungen.

Kund:innen mit chronischer Venenerkrankung und gleichzeitig

→ leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder

→ Diabetes mellitus / diabetischer Polyneuropathie (PNP) haben besondere Anforderungen an einen medizinischen Kompressionsstrumpf.

mediven angio wurde speziell dafür entwickelt – und die Sicherheit in einer klinischen Studie bestätigt. Fragen Sie Ihre Kund:innen aktiv nach diesen Begleiterkrankungen.

Kriterien	Material	Leicht (z. B. mediven elegance)	
			
1. Gewicht			
2. Phlebödemneigung		—	
3. Schweregrad der Erkrankung			
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf		mediven elegance	
		mediven for men	
			
			
			
			
			

medi Tipp



Bitte berücksichtigen Sie bei C5 und C6
zusätzlich das Therapiekonzept Ulcus
cruris. Art.-Nr.: 0050515
www.medi.biz/wunde

mediven® Flachstrick: Versorgungslogik Bein

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir die mediven Flachstrick-Produkte für Patient:innen mit folgenden Charakteristika.*

Schritt 3: Patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen

Material	Leicht z. B. mediven mono®	Mittel z. B. mediven® easy	Stark z. B. mediven® 100 lites
Kriterien			
Bindegewebe	normal bis fest	weich bis fest	sehr weich bis verhärtet
Gewicht			
Vertiefte Hautfalten / Kallusprünge			
Empfohlener mediven® Kompressionsstrumpf	mediven mono®	mediven® easy	mediven® 100 lites

Versorgen Sie Lymph- und Lipödeme mit
mediven Flachstrick – siehe Versorgungslogik
Flachstrick. Art.-Nr.: 0025090
www.medi.biz/fs-versorgungslogik

Mittel
(z. B. mediven plus)

Kräftig
(z. B. mediven forte)



+



++

mediven comfort

mediven cotton

mediven plus

mediven active

mediven forte



Entstauungstherapie mit circaid®

Medizinische adaptive Kompressionssysteme, wie circaid juxtalite, sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Als Hilfsmittel bieten sie eine effektive Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und eignen sich hervorragend zur Behandlung des offenen Beins.



circaid®

Produkteigenschaften



Built-In-Pressure®

Built-In-Pressure® System

- Zum Einstellen, Kontrollieren und Nachjustieren des korrekten therapeutischen Drucks



Breathe-O-Prene

Breathe-O-Prene

- Atmungsaktives Material
- Geruchshemmender Effekt



Juxtaposed band

Juxtaposed Band-System

- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Bänder einzeln nachjustierbar



Variety

Vielfalt

- Großes Sortiment an Versorgungsoptionen
- Umfangreiches Größenangebot



Easy handling

Einfache Handhabung


- Leichtes An- und Ablegen nach Einweisung durch Fachpersonal



Inelastic

Unelastisch

- Unelastisches Material für eine effektive Therapie und hohen Tragekomfort
- Von der Natur inspiriert

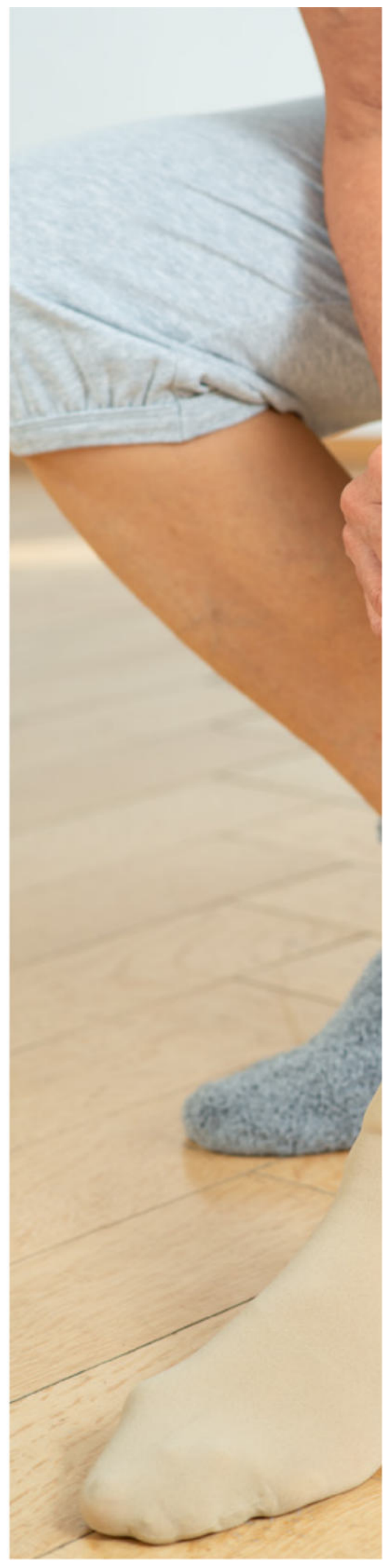




circaid® Built-In-Pressure® System (BPS)

Unelastische circaid Kompressionsprodukte lassen sich auf einen exakten Kompressionsbereich mit gradiertem Druckverlauf einstellen – vom Sprunggelenk aufwärts.

Das circaid Built-In-Pressure Systems (BPS) sorgt bei der Kompressionstherapie für den erforderlichen Kompressionsbereich. Mit der Messkarte für das circaid Built-In-Pressure System (BPS) können Patient:innen ihren verordneten Kompressionsbereich beim Anlegen des Produkts einstellen und bei Bedarf im Laufe des Tages nachregulieren. Somit ist der richtige Kompressionsbereich über die gesamte Tragedauer gewährleistet. Gleichzeitig lässt sich leicht bestimmen, ob der richtige Druckbereich angelegt ist.

circaid® Maßtabelle

Maßtabelle

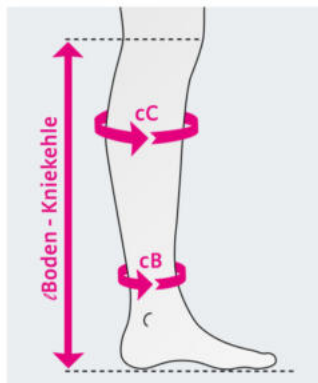

Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtalite nicht möglich.

circaid® juxtalite® Unterschenkel

Umfangmaße in cm				
	S	M	M – X*	L
cC	26 – 36	33 – 44	44 – 54	41 – 51
cB	19 – 22	22 – 27	22 – 27	25 – 32
	L – X*	XL	XL – X*	XXL
cC	51 – 61	37 – 48	48 – 61	53 – 64
cB	25 – 32	30 – 37	30 – 37	35 – 42
Maße für die Längenbestimmung				
	Kurz		Lang	
∠ Boden – Kniekehle	< 44		> 44	

Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU17702000	JU17002000
M	JU17703000	JU17003000
M – X*	JU17713000	JU17013000
L	JU17704000	JU17004000
L – X*	JU17714000	JU17014000
XL	JU17705000	JU17005000
XL – X*	JU17715000	JU17015000
XXL	JU17706000	JU17006000


* – X = extraweite Wade



medi Tipp

Mit dem circaid juxtalite Maßband (Art.-Nr. 0097C78) einfach und schnell zur richtigen Produktlänge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel an und halten das Maßband an das Bein Ihrer Kund:innen. Sie können direkt ablesen, welche Produktlänge notwendig ist.

Maßtabelle

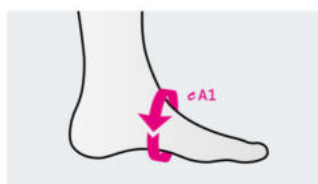


Hinweis


Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

circaid® juxtalite® Fußteil

Umfang in cm	S	M
cA1	19 – 26	24 – 31
Art.-Nr.	JU1W002000	JU1W003000

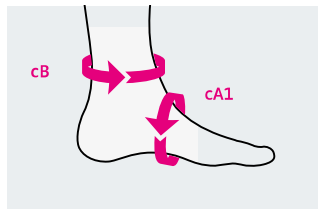Maßtabelle**circaid® pac band Fußteil**

Umfang in cm	Standard	Groß	Extragroß
cB	19 – 27	25 – 50	45 – 56
cA1	19 – 36	22 – 41	22 – 41
Art.-Nr.	JU5P001000	JU5P002000	JU5P003000
PZN	11484780	11484797	12575651

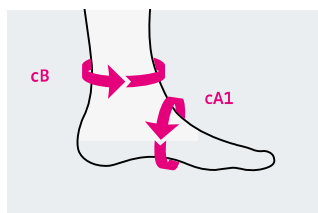Maßtabelle**circaid® kompressive Socke**

Umfang in cm	Standard	Groß
cB	19 – 27	25 – 50
cA1	19 – 36	22 – 41
Art.-Nr.	JU51001000	JU51002000

circaid® Positionsnummern

circaid juxtalite Unterschenkel	circaid juxtalite Fußteil
Serie	Serie
17.06.23.2001	17.06.23.3001



Die mediven® Wohlfühl- Kompression

mediven verkörpert in der modernen Venentherapie passende medizinische Kompressionsstrümpfe für nahezu jede Indikation. Sie sind bis ins Detail auf die Bedürfnisse der Patient:innen abgestimmt.

medi denkt in Sachen Venentherapie weiter. Deshalb können sich Ihre Kund:innen auf mediven Produkte verlassen. mediven Strümpfe werden auf Hightech-Niveau produziert, sind mit Wohlfühl-Eigenschaften ausgestattet und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.

mediven®

Produkteigenschaften



Clima Comfort* für

- Raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche
- Hohe Atmungsaktivität



Integrierte Clima Fresh Funktion

- Geruchshemmender Effekt



Perfect Fit

- Hohe Passgenauigkeit
- Medizinisch wirksamer Druckverlauf
- Optimale Versorgungsbedingungen bei Serie und Maß



Große Vielfalt an Varianten und Sonderausführungen

Farben für mehr Lebensqualität

- Große Auswahl an Standardfarben und topaktuelle Trendfarben erhältlich.

Hightech-Faden für natürliche Elastizität

- Hohe Zweizug-Elastizität
- Optimaler Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen
- Perfekter, faltenfreier Sitz
- Höchst attraktive Transparenz und Feinheit



Produkteigenschaften mediven ulcer kit®




Weich**

- Weiches Material für einen angenehmen Tragekomfort
- Gleitet sanft und schonend über die Haut



Integrierte Clima Fresh Funktion

- Geruchshemmender Effekt

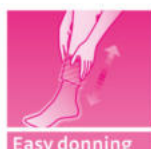

Einfaches An- / Ablegen***

- Unter- und Überstrumpf mit jeweils 20 mmHg zum einfachen An- und Ablegen
- Weicher Unterstrumpf erleichtert das Anlegen des Überstrumpfes



* Clima Comfort

Wissenschaftlich getestet vom französischen Institut IFTH¹. Das Testergebnis zeigt, dass die Clima Comfort Technologie von medi den Klimaausgleich zwischen Haut und Strumpf gewährleistet. medi erreicht eine hervorragende Gesamtbewertung mit 11 von 12 Punkten.


¹ Gardon-Mollard C, Gogué-Meunier G. Etude comparative du transfert de la vapeur d'eau dans différents articles de compression médicale. Phlébologie 2011;64(2):53-60.

** Diese Merkmale gelten nur für den mediven ulcer Unterstrumpf

*** Dieses Merkmal gilt für das mediven ulcer kit


Maßtabelle

mediven elegance®

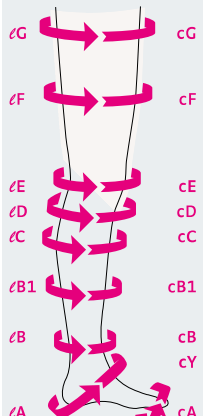Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
AG mit Haftband weit	cG	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
 ℓ = Längen- c = Umfang- maße maße Umfangmaße in cm ℓG ℓF ℓE ℓD ℓC ℓB1 ℓB ℓA cG cF cE cD cC cB1 cB cY cA	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
	ℓG normal	72 – 83 cm						
Längenmaße	ℓG kurz	62 – 71 cm						
	ℓD normal	39 – 44 cm						
	ℓD kurz	34 – 38 cm						
	Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36 – 43						

Maßtabelle

mediven® plus · mediven® cotton · mediven comfort®

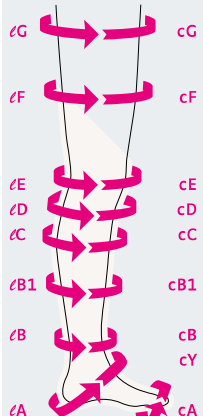
Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
AG mit Haftband weit	cG	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
 ℓ = Längen- c = Umfang- maße maße Umfangmaße in cm ℓG ℓF ℓE ℓD ℓC ℓB1 ℓB ℓA cG cF cE cD cC cB1 cB cY cA	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
	ℓG normal	72 – 83 cm						
Längenmaße	ℓG kurz	62 – 71 cm						
	ℓD normal	39 – 44 cm						
	ℓD kurz	34 – 38 cm						
	Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36 – 43						

Nur bei mediven plus AT	
Wir empfehlen ein Maxi-Leibteil ab einem Leibteillumfang von:	
Größe I – III	T = ab 95 cm H = ab 110 cm
Größe IV – V	T = ab 120 cm H = ab 135 cm
Größe VI – VII	T = ab 140 cm H = ab 145 cm

mediven® Maßtabellen


Maßtabelle

mediven® forte

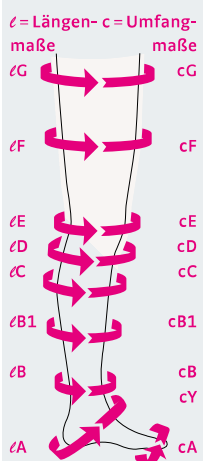Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	44–47	46–50	50–54	53–58	56–61	60–65	64–70
AG mit Haftband weit	cG	48–53	51–57	55–61	59–65	62–70	66–74	71–80
	cG	44–53	46–57	50–61	53–65	56–70	60–74	64–80
	cF	40–47	42–51	45–55	48–58	51–62	54–67	58–72
	cE	30–37	33–40	36–42	38–44	40–46	42–48	44–50
	cD	28–33	30–35	32–37	34–39	36–41	38–43	40–45
	cC	29–34	31–36	33–38	35–40	37–42	39–44	41–46
	cB1	24–26	26–28	28–31	30–33	32–35	34–37	36–39
	cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	cY	28–30	29–32	31–34	33–36	34–38	36–40	37–41
	cA	18–21	20–23	22–25	24–27	26–29	28–31	30–33
Längenmaße		lG normal	72–83 cm	Fußteile				
		lG kurz	62–71 cm	2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze:				
		lD normal	38–43 cm	kleiner Fuß bis 23 cm ≙ Schuhgröße 36–38				
		lD kurz	33–37 cm	großer Fuß ab 23 cm ≙ Schuhgröße 38–43				

Maßtabelle

mediven® active • mediven® for men mediven® angio

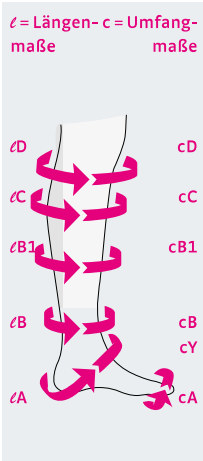Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
	cD	27–33	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50
	cC	28–34	30–37	33–40	35–43	37–46	39–49	41–51
	cB1	23–27	24–29	26–32	29–35	31–37	33–39	35–41
	cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	cY	26–31	28–33	29–35	31–37	32–38	33–40	34–42
	cA	17–22	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34	28–35
Längenmaße		mediven active		Fußteile				
		lD normal	43–49 cm	mediven active				
		lD kurz	37–42 cm	geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 38–48				
		mediven for men mediven angio		mediven for men				
		lD normal	39–44 cm	geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 39–46				
		lD kurz	34–38 cm	mediven angio				
				2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze:				
				kleiner Fuß bis 25 cm ≙ Schuhgröße 36–40				
				großer Fuß ab 25 cm ≙ Schuhgröße 40–46				

mediven®

Positionsnummern

	mediven elegance		mediven for men	mediven comfort		mediven cotton		mediven plus	
	Serie	Maß	Serie	Serie	Maß	Serie	Maß	Serie	Maß
CCL 1									
AD	1706.01.0061	1706.10.0013	1706.01.0084	1706.01.0073	1706.10.0012	1706.01.0131	1706.10.0097	1706.01.0023	1706.10.0027
AF		1706.11.0006							1706.11.0013
AG	1706.03.0055	1706.12.0013		1706.03.0068	1706.12.0012	1706.03.0113	1706.12.0084	1706.03.0019	1706.12.0026
AT	1706.04.0055	1706.13.0012		1706.04.0071	1706.13.0011	1706.04.0115	1706.13.0081	1706.04.0023	1706.13.0025
AT/U	1706.04.0060							1706.04.0023	
AT/H								1706.04.0023	
CCL 2									
AD	1706.01.1122	1706.10.1026	1706.01.1098	1706.01.1150	1706.10.1024	1706.01.1229	1706.10.1142	1706.01.1050	1706.10.1047
AF		1706.11.1011							1706.11.1020
AG	1706.03.1109	1706.12.1025		1706.03.1139	1706.12.1023	1706.03.1177	1706.12.1128	1706.03.1046	1706.12.1045
AT	1706.04.1091	1706.13.1021		1706.04.1130	1706.13.1020	1706.04.1188	1706.13.1123	1706.04.1038	1706.13.1043
AT/U	1706.04.1096							1706.04.1038	
AT/H								1706.04.1038	
CCL 3									
AD								1706.01.2026	1706.10.2017
AF									1706.11.2008
AG								1706.03.2023	1706.12.2016
AT								1706.04.2015	1706.13.2015
AT/U								1706.04.2015	
AT/H								1706.04.2015	

	mediven active	mediven forte		mediven angio	
	Serie	Serie	Maß	Serie	Maß
CCL 1					
AD	1706.01.0100			1706.01.0124	1706.10.0093
AF					
AG					
AT					
AT/U					
AT/H					
CCL 2					
AD	1706.01.1168	1706.01.1130	1706.10.1025	1706.01.1225	1706.10.1138
AF			1706.11.1021		
AG		1706.03.1121	1706.12.1024		
AT		1706.04.1140	1706.13.1034		
AT/U					
AT/H					
CCL 3					
AD		1706.01.2043	1706.10.2009		
AF			1706.11.2009		
AG		1706.03.2039	1706.12.2008		
AT		1706.04.2030	1706.13.2010		
AT/U					
AT/H					

Abrechnungspositionen für An- und Ausziehhilfen

02.40.01.3000	medi Lang-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Vario-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Hosen Butler
02.40.01.3000	medi Big Butler
02.40.01.3000	medi Arm Butler

Abrechnungspositionen für Zubehör

17.99.99.2003	komprimierendes Leibteil
17.99.99.2006	Hüftbefestigung für AF- und AG-Strümpfe
17.99.99.2007	Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe
17.99.99.2008	Hafttrand
17.99.99.2009	Einbeinhosenteil (Beinring)
17.99.99.2018	Eingriff
17.99.99.2019	Schwangerschaftsleibteil
17.99.99.2020	Stoma-Öffnung
17.06.07.1005	Strumpfhalter einseitig
17.06.07.2005	Strumpfhalter zweiseitig

mediven® Farbspektrum

Alle aktuellen Trendfarben zu unseren Rundstrick-Qualitäten finden Sie unter www.medi.biz/farben

Farbe	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•
Anthrazit	•	•	•		•	•	•	
Grau	○		○		○		○	
Marine	•	•	•		•	•	•	
Cashmere	•		•		•		•	
Caramel	•		•	•	•		•	•
Sand	•		•		•		•	
Beige	•		○		•		○	
medi Magenta	○				○			
Weiß	○				○	•		
Braun		•				•		

○ Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

mediven® Sortimentsübersicht Länge und Befestigung

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AD	Trikotrand	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband schmal (sNoB)	•		•	•	•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•		•		•	
AF	Trikotrand	•				•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•		•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•		•		•	
AG	Trikotrand	•				•		•	
	Hüftbefestigung					•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•	•	•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•	•	•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•		•		•	

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AT	Komfort-Leibteil	•		•	•	•		•	
	Maxi-Leibteil					•			
	leicht kompr. LT	•				•		•	
	mittel kompr. LT					•		•	
	hoch kompr. LT					•		•	
	Zwickel-Auswahl Seite 80 – 91	•		•		•		•	
AT / U	geschlossenes LT	•				•		•	
	offenes LT	•				•		•	
	leicht kompr. LT	•				•		•	
	Zwickel-Auswahl Seite 80 – 91	•				•		•	
AT / H	Schlitz quer					•		•	
	leicht kompr. LT					•		•	
	mittel kompr. LT					•		•	
	hoch kompr. LT					•		•	
	Zwickel-Auswahl Seite 80 – 91					•		•	
AT / E	rechts					•		•	
	links					•		•	
	leicht kompr. LT					•		•	
	mittel kompr. LT					•		•	
	hoch kompr. LT					•		•	
	Herren-Zwickel					•		•	
	U-Zwickel					•		•	
	Zwickel-Auswahl Seite 80 – 91					•		•	





circaid® juxtalite®

Effektive Entstauung – Selbstmanagement für Patient:innen. Die einfache Handhabung von circaid juxtalite ermöglicht es Patient:innen, nach vorheriger Einweisung durch Fachpersonal, die Entstauungstherapie selbstständig durchzuführen. Der individuelle Kompressionsdruck lässt sich exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch von den Patient:innen selbst. Das Nachjustieren der einzelnen Bänder hält den therapeutisch notwendigen Kompressionsdruck aufrecht – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert.¹

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 08.07.2025).

circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives Kompressionssystem für die initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und bei Ulcus cruris venosum – die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir circaid juxtalite für:

- Frauen / Männer
- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie
- Mobile / immobile Patient:innen

Indikationen

circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht²
- 4 Bänder für einfache Handhabung, gerade auch bei älteren Patient:innen
- Breathe-O-Prene: atmungsaktives Material mit einem hohen Arbeitsdruck
- Geruchshemmendes Material



Waschanleitung

Pflegeleicht     für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 08.07.2025).



circaid® juxtalite® Unterschenkel



BPS-Karte

Produktvorteile



Lieferbare Varianten

AD



Hilfsmittelnummer 17.06.23.2001

Material-Zusammensetzung

Innen- und Außenseite	Nylon, Elastan
Schaum-Zwischenschicht	Polyurethan

Einstellbare Kompressionsbereiche

20 – 30 / 30 – 40
40 – 50 mmHg

Standardfarben

S = Serie

Beige
S

Videos

Mehr Informationen sowie ein Anlegevideo finden Sie unter:

Product Video




medi.biz/jl

Lieferumfang

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück circaid Built-In-Pressure System (BPS) Messkarte
- 2 Stück circaid kompressive Socken
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe (Baumwolle, ohne Kompression)

Maßtabelle

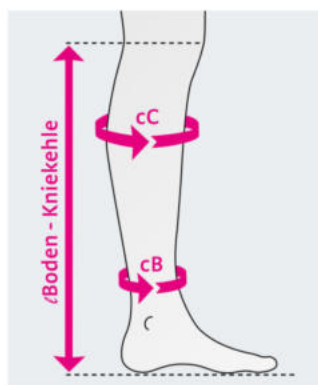

Umfangmaße in cm

	S	M	M – X*	L
cC	26 – 36	33 – 44	44 – 54	41 – 51
cB	19 – 22	22 – 27	22 – 27	25 – 32
	L – X*	XL	XL – X*	XXL
cC	51 – 61	37 – 48	48 – 61	53 – 64
cB	25 – 32	30 – 37	30 – 37	35 – 42

Maße für die Längenbestimmung

	Kurz	Lang
l Boden – Kniekehle	< 44	> 44



Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtalite nicht möglich.

Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU17702000	JU17002000
M	JU17703000	JU17003000
M – X*	JU17713000	JU17013000
L	JU17704000	JU17004000
L – X*	JU17714000	JU17014000
XL	JU17705000	JU17005000
XL – X*	JU17715000	JU17015000
XXL	JU17706000	JU17006000

* – X = extraweite Wade

medi Tipp

Mit dem circaid juxtalite Maßband (Art.-Nr. 0097C78) einfach und schnell zur richtigen Produktlänge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel an und halten das Maßband an das Bein Ihrer Kund:innen. Sie können direkt ablesen, welche Produktlänge notwendig ist.



1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)

- Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Jederzeit nachjustierbar – für eine kontinuierliche Kompressionstherapie
- Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

2 Breathe-O-Prene

- Unelastisches Material mit hoher Wandstabilität – für hohen Arbeitsdruck
- Atmungsaktiv und geruchshemmend

3 Einfache Handhabung

- Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung – fördert Selbstmanagement
- Weniger fehleranfällig in der Anlage als Kompressionsbandagierungen¹

4 Juxtaposed Band-System

- System aus einzelnen, ineinandergreifenden Bändern – für optimalen Sitz
- Extrabreite Bänder vermeiden Fensterödeme
- Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust der Versorgung – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert¹

5 Kompressive Socke

- Beugt Ödemen im Vorfuß vor
- Fördert die Mobilität – Tragen normaler Schuhe möglich²
- Zusätzliche Fußoption verfügbar

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

² Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie. Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.

circaid® juxtalite® Fußoption

Die folgende Fußoption ist die perfekte Ergänzung zu circaid juxtalite.

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen. Die Indikationen der circaid Fußoptionen sind identisch zu den Indikationen der entsprechenden circaid Beinversorgung. Diese müssen separat bestellt werden.

circaid® juxtalite® Fußteil

Zusätzliche Kompressionsversorgung mit geschlossener Ferse für venöse Erkrankungen.

Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Für eine perfekte Passform: Produkt in der Länge kürzbar
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden

Material-Zusammensetzung

Innen- und Außenseite Nylon, Elasthan

Schaum-Zwischenschicht Polyurethan

Hilfsmittelnummer

17.06.23.3001



circaid® juxtalite® Fußteil

Videos

Mehr Informationen, ein Anlegevideo sowie ein Video zur individuellen Anpassung finden Sie unter:

Product Video



Maßtabelle



Umfang in cm	S	M
cA1	19 – 26	24 – 31
Art.-Nr.	JU1W002000	JU1W003000

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

circaid® Fußoptionen

Die folgenden Fußoptionen werden für das Tragen in Kombination mit circaid juxtalite empfohlen.

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen. Die Indikationen der circaid Fußoptionen sind identisch zu den Indikationen der entsprechenden circaid Beinversorgung. Diese müssen separat bestellt werden.

circaid® pac band Fußteil

Zusätzliche Kompression für Fußrücken und Knöchel


Produktdetails

- Zusätzliche Kompression für den Fußrücken und im Knöchelbereich bei mäßiger bis starker Ödemneigung
- Patientenindividuell zuschneidbar
- Einfache Handhabung
- Leichtes, atmungsaktives Material
- Verfügbar in den Größen Standard, Groß und Extragroß
- Bilateral einsetzbar (linker oder rechter Fuß)



circaid® pac band Fußteil

Maßtabelle

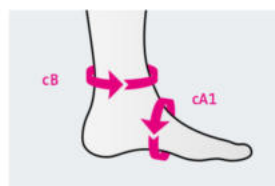

Umfang in cm	Standard	Groß	Extragroß
cB	19–27	25–50	45–56
cA1	19–36	22–41	22–41
Art.-Nr.	JUSP001000	JUSP002000	JUSP003000
PZN	11484780	11484797	12575651

Material-Zusammensetzung

Innen- und Außenseite	Nylon, Elastan
Schaum-Zwischenschicht	Polyurethan

circaid® kompressive Socke

Standard Kompressionsversorgung für Fuß und Sprunggelenk

Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Kann mit anderen circaid Fußoptionen kombiniert werden
- Verfügbar in den Größen Standard und Groß
- Standard Fußoption bei circaid juxtalite



circaid® kompressive Socke

Maßtabelle



Umfang in cm	Standard	Groß
cB	19–27	25–50
cA1	19–36	22–41
Art.-Nr.	JU51001000	JU51002000

Material-Zusammensetzung

Nylon	Elastan
88 %	12 %

circaid® Unterziehstrumpf

Zusätzlicher Tragekomfort

- Kann direkt auf der Haut unter den circaid Produkten getragen werden
- Angenehmer Tragekomfort
- Fixiert Wundauflagen
- Eine Größe für alle Umfänge und Längen, da dehnbar in Breite und Länge
- Standardmäßig im Lieferumfang des circaid juxtalite enthalten

Artikel	Artikelnummer	Größe
1 Paar Unterziehstrümpfe	JULS709000	Unigröße

Material-Zusammensetzung	
circaid Unterziehstrümpfe	circaid Unterziehstrumpf, silberfarben
94 % Baumwolle	91 % Polyester
6 % Elastan	5 % Nylon
	4 % Elastan



circaid® Unterziehstrumpf


circaid® Überzug

Glatter Überstrumpf für circaid Produkte

- Kann über circaid Beinversorgungen getragen werden
- Verhindert unerwünschtes Festkletten der Kompressionsversorgung in der Kleidung
- Verleiht der Kompressionsversorgung ein edles Aussehen
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Beige
- Ohne therapeutische Kompression

Artikel	Artikelnummer	Farbe	Größe
1 Stück circaid Überzug Unterschenkel	JU5C7B2000	Beige	S
	JU5C7B4000	Beige	L
	JU5C7A2000	Schwarz	S
	JU5C7A4000	Schwarz	L

Material-Zusammensetzung		
Nylon	Elastan	Polyethylen
81 %	18 %	1 %

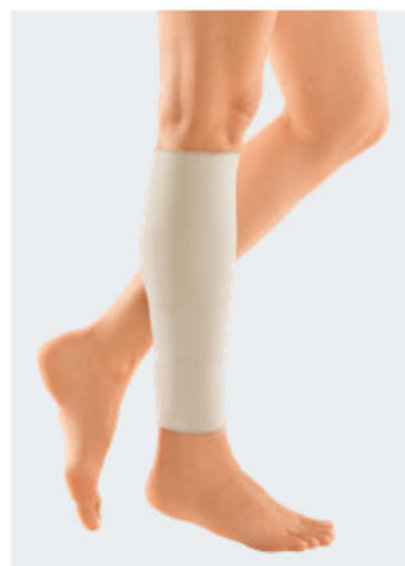

circaid® Überziehstrumpf Unterschenkel Beige



mediven elegance®

Das ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf? Aber ja! Und zwar ein Modell, das die Schönheit der Frau unterstreicht. Der mediven elegance verwöhnt die Beine mit seiner kompressiven Wirkung. Dabei schmiegt er sich wie eine zweite Haut an das Bein. Er kann zu jeder Garderobe kombiniert werden und bringt die weibliche Figur perfekt zur Geltung. Getreu dem Motto: Man sieht Schönheit.

mediven elegance. So attraktiv wirkt Kompression.

mediven elegance®

Man sieht Schönheit.
So attraktiv wirkt Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven elegance für:

- Frauen
- Normalgewichtig
- Keine Phlebodemneigung
- Straffes Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C2r nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Transparente Feinstrumpfoptik
- Mehr Zehenfreiheit durch die Soft Elastic Fußspitze
- Breit und weich gearbeitetes Kniestrumpf-Bündchen
- Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz
- Edle Schmuck-Haftband-Motive für Schenkelstrümpfe



Waschanleitung

Pflegeleicht    
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



Flächen-Haftband Rose



Soft Elastic Fußspitze



Breites Kniestrumpf-Bündchen

Produktvorteile



Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0061	–	17.06.03.0055	17.06.04.0055	17.06.04.0060
Serie CCL 2	17.06.01.1122	–	17.06.03.1109	17.06.04.1091	17.06.04.1096
Maß CCL 1	17.06.10.0013	17.06.11.0006	17.06.12.0013	17.06.13.0012	–
Maß CCL 2	17.06.10.1026	17.06.11.1011	17.06.12.1025	17.06.13.1021	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 79	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT	Komfort-Zwickel
	AT / U	mit geschlossenem Leibteil
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	66 %	34 %
CCL 2	61 %	39 %

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

**Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Leicht

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden
Kristallen.



Hinweis

Der mediven elegance
ist auch in Trendfarben
erhältlich.
Mehr Informationen unter
[medi.biz/trendfarben](https://www.mediviz.biz/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.



mediven[®] for men

Männer sind von medizinischen Kompressionsstrümpfen schwerer zu überzeugen als Frauen. Die Argumente des mediven for men sprechen jedoch für sich und helfen Ihnen dabei.

Dieser Kompressionsstrumpf sieht aus wie ein modischer Herrenstrumpf und ist der perfekte Begleiter für den Mann. Der stilsichere Strumpf im modischen Business-Ripp-Design sitzt wie eine zweite Haut.

mediven for men. Für den modischen Business-Look.

mediven[®] for men

**Der Stilsichere – für den modischen
Business-Look**

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven for men für:

- Männer
- Normalgewichtig
- Keine / leichte Phlebodemneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C3 nach CEAP
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine

Eigenschaften

- Anatomische Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz
- Modisches Business-Ripp-Design
- Lanolin-Ausrüstung³
- Besonders weicher Komfortbund
- Für die Schuhgrößen 39 – 46 geeignet

Waschanleitung

Pflegeleicht    
für Waschmaschine und
Trockner geeignet



Kniestrumpf im modischen „Business-Ripp-Design“ mit Komfort-Bündchen



Anatomisch geformte Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

³ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

Produktvorteile



Material

Leicht

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

Schwarz
S

Anthrazit
S

Marine
S

Braun
S

Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1 17.06.01.0084

Serie CCL 2 17.06.01.1098

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand
Fußteil	geschlossene Fußspitze Schuhgröße 39 – 46

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	77 %	23 %
CCL 2	71 %	29 %

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

**Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).



mediven comfort®

mediven comfort ist aus traumhaft weichem Material gefertigt. Der Strumpf in den Kompressionsklassen 1 und 2 macht die Therapie von Venenleiden so angenehm wie möglich. Mit seiner Lanolin-Ausrüstung pflegt er die Haut und geht besonders sanft mit ihr um. Wie Sie Ihre Kund:innen vom mediven comfort überzeugen? Lassen Sie sie selbst fühlen!

mediven comfort. So anschmiegsam ist Kompression.

mediven comfort®

Man spürt Weichheit.

So anschiemig ist Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven comfort für:

- Frauen
- Normalgewichtig / übergewichtig²
- Leichte bis schwere Phlebödemeigung²
- Straffes Bindegewebe

Indikationen³

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikoseoperation
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Sehr weiches Material für leichtes An- und Ausziehen
- Lanolin-Ausrüstung⁴



- Doppelt gestrickte Komfortsohle für ein noch angenehmeres Laufgefühl
- Formgebendes Komfort-Leibteil
- Elastischer und strapazierfähiger Komfort-Zwickel

Waschanleitung


Pflegeleicht    
für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Nutzen Sie den mediven comfort bei schwerem Ödem nur bei normalgewichtigen Patient:innen. Bei Übergewicht und starkem Ödem empfiehlt medi kräftigeres Material, um Schnürfurchen vorzubeugen.

³ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

⁴ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

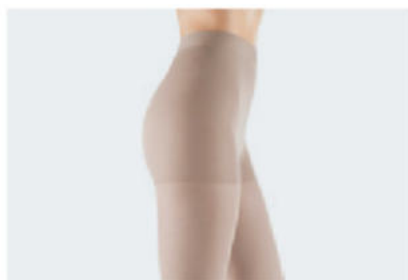

Komfort-Leibteil



Komfortsohle



Noppen-Haftband

Produktvorteile



Clima Comfort

Clima Fresh

Vielfalt

Perfect Fit



Lieferbare Varianten

	AD	AG	AT
Serie CCL 1	17.06.01.0073	17.06.03.0068	17.06.04.0071
Serie CCL 2	17.06.01.1150	17.06.03.1139	17.06.04.1130
Maß CCL 1	17.06.10.0012	17.06.12.0012	17.06.13.0011
Maß CCL 2	17.06.10.1024	17.06.12.1023	17.06.13.1020

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 79
Abschluss	AD Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv AG Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT Komfort-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² Schuhgröße 36 – 43

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	68 %	32 %
CCL 2	65 %	35 %

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven comfort ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter [medi.biz/trendfarben](https://www.medi.biz/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.



*Fühl den Unterschied.
Mach einen Unterschied.*

mediven® cotton

mediven cotton ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf mit Bio-Baumwolle von medi. Die Kombination mit Funktionsfasern sorgt für eine thermoregulierende Wirkung. Die Naturfaser Baumwolle gilt als besonders sanft – und ist damit für empfindliche und allergische Haut geeignet. Dies wurde für mediven cotton dermatologisch von Dermatest geprüft und jeweils mit der Bestnote „sehr gut“ bewertet. Die Verwendung von Bio-Baumwolle und recyceltem Polyamid-Garn bringt zusätzliche Vorteile für Mensch und Umwelt.

mediven cotton. Natürlich gut versorgt.

mediven[®] cotton

Natürlich gut versorgt.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven cotton für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe
- Kund:innen mit sensibler oder allergischer Haut

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Reine Bio-Baumwolle – an der Innenseite des Strumpfes platziert, direkt auf der Haut



- Polyamid-Garn mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent für eine effektive und ressourcenschonende Kompression
- Thermoregulierender Effekt – kühlend bei hohen und isolierend bei niedrigen Temperaturen
- Dermatologisch getestet durch Dermatest – optimale Kompressionsversorgung für Kund:innen mit sensibler oder allergischer Haut
- Blickdichte Optik
- Weiche Bio-Baumwolle auf der Innenseite erleichtert das Anziehen

Waschanleitung

Pflegeleicht     

Für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.
² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



Doppelte Umwindung mit Bio-Baumwoll-Garn



Bio-Baumwolle – direkt auf der Haut



Sehr flacher Abschluss an den Zehen bei offener Fußspitze

Produktvorteile



dermatest-garantie.de



dermatest-garantie.de



STANDARD
100
22.0.02800
Hohenstein HTTI



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

M = Maß*

Schwarz

S + M

Caramel

S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

mediven cotton

	AD	AG	AT
Serie CCL 1	17.06.01.0131	17.06.03.0113	17.06.04.0115
Serie CCL 2	17.06.01.1229	17.06.03.1177	17.06.04.1188
Maß CCL 1	17.06.10.0097	17.06.12.0084	17.06.13.0081
Maß CCL 2	17.06.10.1142	17.06.12.1128	17.06.13.1123

Standardausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand, schmales Noppen-Haftband AG Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT Komfort-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 36 – 43

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)*	Bio-Baumwolle	Elastan (EL)
CCL 1	51 %	27 %	22 %
CCL 2	46 %	27 %	27 %

* mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹ Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).



mediven[®] plus

mediven plus hat sich seit über 40 Jahren für eine Vielzahl an Indikationen für SIE und IHN etabliert. Der bewährte medizinische Kompressionsstrumpf in den Kompressionsklassen 1, 2 und 3 mit zusätzlichen Pluspunkten macht zuverlässig alles mit. Getreu dem Motto: Man erlebt Zuverlässigkeit.

mediven plus. So vielfältig ist bewährte Kompression.

mediven[®] plus

Man erlebt Zuverlässigkeit.
So vielfältig ist bewährte Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven plus für:

- Frauen / Männer
- Normalgewicht / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemen
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, post-thrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft



Eigenschaften

- Hohe Strapazierfähigkeit und blickdichte Optik
- Optimaler Sitz durch Plus-Ferse, optimierte Fußspitze, gerippte Sohlenverstärkung breites Bündchen
- Besonders für starke Oberschenkel empfohlen
- Maxi-Leibteil als Standard-Variante

Waschanleitung


Pflegeleicht     für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



Maxi-Leibteil als Standard-Variante

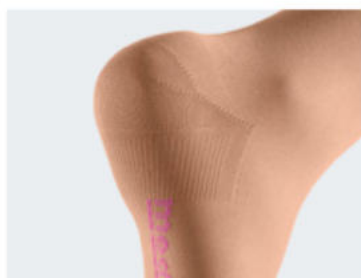

Komfortable Plus-Ferse und zuverlässige Sohlenverstärkung



Breites Bündchen

Produktvorteile



Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 1	17.06.01.0023	–	17.06.03.0019	17.06.04.0023	17.06.04.0023	17.06.04.0023
Serie CCL 2	17.06.01.1050	–	17.06.03.1046	17.06.04.1038	17.06.04.1038	17.06.04.1038
Serie CCL 3	17.06.01.2026	–	17.06.03.2023	17.06.04.2015	17.06.04.2015	17.06.04.2015
Maß CCL 1	17.06.10.0027	17.06.11.0013	17.06.12.0026	17.06.13.0025	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1047	17.06.11.1020	17.06.12.1045	17.06.13.1043	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2017	17.06.11.2008	17.06.12.2016	17.06.13.2015	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 79	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT	Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
		Maxi-Leibteil: Größe I – III: schmaler Zwickel hinten bis Taille Größe IV – V: breiter Zwickel hinten bis Taille Größe VI – VII: extrabreiter Zwickel hinten bis Taille
	AT / U	mit geschlossenem Leibteil
	AT / H	Schlitz quer
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² , Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	75 %	25 %
CCL 2	69 %	31 %
CCL 3	63 %	37 %

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven plus ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter [medi.biz/trendfarben](https://www.medi.biz/trendfarben)



mediven[®] active

Männer, die sich zum Beispiel beruflich bedingt sehr viel bewegen, benötigen einen robusten medizinischen Kompressionsstrumpf. Er muss hohen Belastungen standhalten und im Schuh perfekt sitzen.

Der Herrenstrumpf im sportlichen Feinripp-Design ist sehr weich und in keiner Situation als medizinischer Kompressionsstrumpf zu erkennen. Zeigen Sie Ihren männlichen Kunden, dass es Kompressionsstrümpfe gibt, die auch nach Mann aussehen.

mediven active. Für den aktiven Mann.



mediven[®] active

Der Robuste – für den aktiven Mann

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven active für:

- Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemen-
neigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine

Eigenschaften

- Nicht spürbare und kaum sichtbare Naht
- Feinripp-Design – von einem Herrenstrumpf nicht zu unterscheiden
- Komfortsohle mit Fersenverstärkung, die starken Belastungen standhält
- Weicher und breiter Abschlussbund für hohen Komfort
- Sehr robustes Gestrick
- Für die Schuhgrößen 38 – 48 geeignet

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und
Trockner geeignet



Fußspitze ohne Naht



Komfortsohle

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1 17.06.01.0100

Serie CCL 2 17.06.01.1168

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand
Fußteil	geschlossene Fußspitze Schuhgröße 38 – 48

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	90 %	10 %
CCL 2	89 %	11 %

Material

Kräftig

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

Schwarz
S

Anthrazit
S

Marine
S

Weiß
S

Braun
S

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).



mediven[®] forte

Dieser Strumpf hält schwere Indikationen in Schach. Schließlich geht es darum, dass auch Kund:innen mit starkem Venenleiden aktiv am Leben teilhaben und dabei möglichst wenig Kompromisse machen müssen.

Der mediven forte ist über den ganzen Tag hinweg maximal druckstabil. Sein kräftiges Material ermöglicht die erforderliche Tiefenwirkung. Der Strumpf ist zudem sehr strapazierfähig und langlebig.

mediven forte. So stark ist wohltuende Kompression.



mediven® forte

Man fühlt Schutz. So stark ist
wohltuende Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der
Passform und der Produkteigenschaf-
ten empfehlen wir mediven forte für:

- Frauen / Männer
- Übergewichtig / adipös
- Leichte bis schwere Phlebödeme-
neigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der
Stadien C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Funktionelle venöse Insuffizienz
bedingt durch Adipositas
- Stauungsbeschwerden und Ödeme
in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative,
berufsbedingte, medikamentös
bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, post-
thrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen
Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der
Schwangerschaft



Eigenschaften

- Kräftiges, strapazierfähiges
Material für noch mehr Tiefen-
wirkung
- Maximale Druckstabilität
den ganzen Tag
- Formstabiler Softbund am
AD-Abschluss
- Blickdichte Optik
- Fühlbare Frische durch die
geruchshemmende Wirkung
- 2 Fußlängen bei Serie mit Fußspitze:
 - Kleiner Fuß bis 23 cm
 - Großer Fuß ab 23 cm

Waschanleitung

Pflegeleicht    
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung
weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung
durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressions-
strumpfes ist abhängig von der Indikation
und den individuellen Bedürfnissen der
Patient:innen.



AD-Strumpf mit offener Fußspitze



Strapazierfähiges Gestrick



Formstabiler Softbund am
AD-Abschluss

Produktvorteile



Material

Kräftig

Kompressionsklasse

CCL 2, 3

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 2	17.06.01.1130	–	17.06.03.1121	17.06.04.1140	–	–
Serie CCL 3	17.06.01.2043	–	17.06.03.2039	17.06.04.2030	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1025	17.06.11.1021	17.06.12.1024	17.06.13.1034	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2009	17.06.11.2009	17.06.12.2008	17.06.13.2010	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführung	möglich, siehe Seite 72 – 79	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv, Hüftbefestigung Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT	Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ²	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 2	64 %	36 %
CCL 3	64 %	36 %

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Standardfarben

S = Serie

M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven forte ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter [medi.biz/trendfarben](https://www.medi.biz/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).
² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.

KOMPRESSION bei chronischer Venenerkrankung und pAVK/ Diabetes?

Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

Ja, aber sicher!*

mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



Extralange, flache Naht

mediven® angio

Eine Kompressionstherapie bei Patient:innen mit und gleichzeitigen Begleiterkrankungen stellt besondere Anforderungen an einen Kompressionsstrumpf. Der mediven angio wurde speziell hierfür entwickelt und ist die optimale Lösung für Venenpatient:innen mit pAVK und / oder Diabetes mellitus.

Er ist der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.¹

mediven angio. Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze.

mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze



medi Tipp²:

Aufgrund der Produkteigenschaften und der Ergebnisse der klinischen Studie¹ empfehlen wir mediven angio für:

- Frauen / Männer mit chronischer Venenerkrankung
- Begleitende leichte bis mittelschwere pAVK
- Begleitenden Diabetes mellitus

Indikationen³

- Chronische Venenerkrankung der Stadien C0s – C5 nach CEAP

Eigenschaften

- Einzigartige, weiche Polsterung mit Merino-Plüsch im gesamten Fuß
- Natürliche Merino-Wolle für optimale Thermoregulierung und zusätzlichem Tragekomfort
- Extralange und flache Naht schmiegt sich angenehm an die Zehen an, sodass eine anatomische Spitzenform entsteht
- Spezielle Rippenstruktur für ein ideales Druckverhältnis zwischen Ruhe- und Arbeitsdruck und als Orientierungshilfe für die korrekte Anlage
- Mikro-Plüsch im gesamten Unterschenkel für einen angenehmen Tragekomfort
- Farbe Caramel – eignet sich zur schnellen Erkennung von Flüssigkeitsabsonderungen bei etwaigen oberflächlichen Wunden durch Dunkelfärbung des Gestricks



Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹

² Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

³ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

⁴ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

⁵ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

mediven® angio


Die Lösung für Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus



Extrabreites Abschlussbündchen

Sicherer Halt und großflächige
Druckverteilung

- ✓ Vermeidung von
Einschnürungen

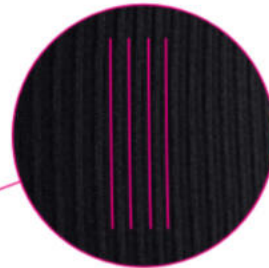

Feste Rippenstruktur

Griffige Struktur mit hoher Längsdehnung
und feinem Plüsch-Material

- ✓ Vereinfachtes Anlegen
und angenehmer Tragekomfort



Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Einzigartige, weiche Polsterung von der
Zehenspitze bis über die Knöchel

- ✓ Vermeidung von Druckspitzen bei
Sensibilitäts- oder Hautstörungen
und optimale Thermoregulierung

Extralange, flache Naht

Besondere Naht bis über die
Zehengrundgelenke

- ✓ Optimale Druckentlastung der
Zehenspitzen und Zehengrundgelenke



mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze

Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1	17.06.01.0124
Serie CCL 2	17.06.01.1225
Maß CCL 1	17.06.10.0093
Maß CCL 2	17.06.10.1138

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII Länge normal und kurz
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	Extrabreites Bündchen
Fußteil	Geschlossene Fußspitze kleiner Fuß: bis 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 36 – 40 großer Fuß: ab 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 40 – 46

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)	Merino-Wolle
CCL 1	71 %	22 %	7 %
CCL 2	70 %	23 %	7 %



mediven® angio in Caramel



mediven® angio in Schwarz

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Vielfalt



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



dermatest-
garantie.de

Standardfarben

S = Serie
M = Maß*

Schwarz
S+M

Caramel
S+M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Einzigartige Neuheit

mediven angio – der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.*

Einzigartige Produkteigenschaften

mediven angio wurde speziell für Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung und leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus entwickelt und optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmt.

Einzigartige Sicherheit

In einer klinischen Studie¹ mit beiden Patiententypen wurde die Sicherheit von mediven angio untersucht und wissenschaftlich belegt:

- ✓ Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- ✓ Keine Schädigung der Haut
- ✓ Keine Schnürfurchen
- ✓ Keine Druckstellen
- ✓ Hoher Tragekomfort

Bestätigt für die Kompressionsklassen 1 und 2



* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹
¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.



mediven® Sonderausführungen Rundstrick

Jede:r Kund:in ist anders – um individuell zu versorgen, bieten wir Ihren Kund:innen zahlreiche Sonderausführungen. Das sind Artikel-Varianten, die über das mediven Standard-Sortiment hinausgehen.

Die nachfolgende Übersicht unterstützt Sie bei der Wahl der richtigen Zusätze. Durch die individuelle Versorgung tragen Sie dazu bei, dass Kund:innen ihre Strümpfe gerne und regelmäßig tragen. Achten Sie daher auf die unterschiedlichen Anforderungen von Venenpatient:innen und gehen Sie explizit darauf ein. medi bietet Ihnen alles, was Sie dafür benötigen. Für zufriedene Kund:innen.



Standard-Ausführungen

Fußspitzen

Offene Fußspitze

medi Tipp:

- Offene Spitze erfolgt auf Wunsch der Patient:innen, wenn sie diese bevorzugen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Geschlossene Fußspitze

medi Tipp:

- Unifußgröße: mediven elegance, mediven comfort, mediven cotton und mediven plus Schuhgröße 36 – 43
- Zwei Fußgrößen bei mediven forte:
 - Klein, bis 23 cm
 - Groß, ab 23 cm

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Sonderausführungen Fußspitzen

Softfußspitze

medi Tipp:

- Bei Kund:innen, die im Zehenbereich empfindlich sind (z. B. Hammerzehe) und daher gerne eine besonders weiche Fußspitze tragen möchten

Hinweis: Es kann aufgrund der unterschiedlichen Strickmaterialien zu Farbabweichungen kommen.

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Hallux-valgus-Zehenfach

medi Tipp:

- Bei Kund:innen, die mehr Bewegungsfreiheit in den Zehen benötigen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–	–



Anatomische Fußspitze

medi Tipp:

- Bei Kund:innen mit einer Überempfindlichkeit im Zehenbereich
- Besonders gut für schmale Schuhe geeignet (z. B. Business-Schuhe)

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–	–



Trikot-Fußspitze nach Angaben verlängern oder verkürzen

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Trikot-Fußspitze
nach Angaben verlängert



Trikot-Fußspitze
nach Angaben verkürzt

Trikot-Rand am Fuß nach Angaben verlängern

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Fußlänge nach Angaben kürzen

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Anti-Rutsch-Segmente

medi Tipp:

- Bieten mehr Unterstützung im Alltag
- Das Gehen auf Strümpfen wird sicherer und Ihre Patient:innen haben mehr Halt* im Schuh

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



* Halt bezieht sich auf das Gehen in Schuhen mit Absatz.

Standard-Ausführungen Haftbänder

Flächen-Haftband Rose, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Mikronoppen-Haftband sensitiv

Flächen-Haftband Rose

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch flächige Beschichtung. Elegantes, feminines Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.

Noppen-Haftband

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

Noppen-Haftband mit Motiv

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Modisches Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

Mikronoppen-Haftband sensitiv

medi Tipp: kaum spürbare, feine Mikronoppen für zuverlässigen Halt. Sehr gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.



Flächen-Haftband Rose



Noppen-Haftband



Noppen-Haftband
mit Motiv



Mikronoppen-
Haftband sensitiv



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Quelle:
Final Clinical Security Test –
Eurofins DERMSCAN,
Bucharest, 2019.

	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen- Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen- Haftband sensitiv
mediven elegance*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven comfort*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven cotton*				
Serienanfertigung	–	Standard	–	Standard
Maßanfertigung	–	Standard	–	Standard
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–
mediven plus*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven forte*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

*Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis mit Haftband

Hüftbefestigung

medi Tipp:

- Sicherer Halt und mehr Tragekomfort
- Bei Kund:innen mit starken oder konisch verlaufenden Oberschenkeln
- Bei sehr weichen Oberschenkeln
- Bei Allergiker:innen (Alternative zum mit Silikon beschichteten Haftband)
- Bei Kund:innen, die durch mechanische Wirkungsweise von Haftbändern zu Hautreaktionen neigen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis


* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand



Strumpfhalterung

Strumpfhalterung aus Gurtband, verstellbar mit zwei bzw. mit vier Strumpfhaltern. Kann bei allen Qualitäten angewendet werden.

Einseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm
Doppelseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm

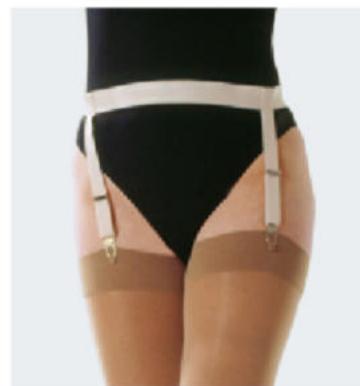

Meterware

Kann nach Bedarf bestellt werden.

- Flächen-Haftband Rose (FBR)
- Noppen-Haftband (NoB)
- Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)
- Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)
- Zusammensetzung:
Silikon, Polyamid, Polyester, Elasthan
- In den Farben:
Beige, Caramel, Schwarz, Weiß und Cashmere







Vielfalt mediven® Leibteil- und Zwickel-Varianten

Der perfekte Sitz des Kompressionsstrumpfes ist das A und O.

Nur wenn Ihre Kund:innen sich damit wohlfühlen, tragen sie ihren Strumpf konsequent. medi bietet daher unterschiedliche Leibteil- und Zwickel-Varianten. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick zu den zahlreichen Möglichkeiten. Neben den Bildern vereinfacht Ihnen eine Beschreibung die richtige Wahl.

Die rundgestrickten mediven® Leibteile in Serie

Leibteile patientenindividuell und einfach auswählen mit medi

	Komfort-Leibteil (AT)	Maxi-Leibteil (AT)	Umstandshose (AT / U) geschlossen	Herrenhose (AT / H)	Kompressives Leibteil	Mit Aufpreis
						
	Angenehme Kompression mit hohem Tragekomfort	Für große Hüft- und Taillenumfänge	Weiches und mitwachsendes Bauchteil	Mit praktischem Eingriff	Für weiches Bindegewebe und bei Bauchmuskelschwäche	
mediven elegance®	•		•		•	
mediven comfort®	•					
mediven® cotton	•					
mediven® plus	•	•	•	•	•	
mediven® forte	•					

Hinweis: Wenn Sie ein Leibteil mit einem speziellen Zwickel wünschen, bestellen Sie bitte eine Versorgung nach Maß.

Individuelle Sonderausführungen in der Serienversorgung

Alle mit Aufpreis

	Leibteil kürzen	Leibteil verlängern	Leibteil-Länge vorne x cm / hinten x cm (Körpermaß)	Stoma-Öffnung	Umstandshose (AT / U) offen	Offener Schritt
mediven elegance®	•	•	•	•	•	•
mediven comfort®	•	•	•	•		•
mediven® cotton	•	•	•	•		•
mediven® plus	•	•	•	•	•	•
mediven® forte	•	•	•	•		•



Sonderausführungen Leibteile


Strumpfhose mit kompressivem Leibteil

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Bei Kund:innen, die einen hohen Leibteilmumfang benötigen
- Bei Kund:innen, die weiches Bindegewebe besitzen
- Bei Bauchmuskelschwäche oder Diastasen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

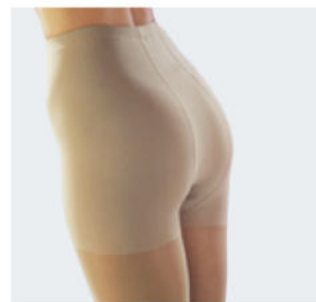

Leibteil verlängert / verkürzt

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verlängert bei Kund:innen mit stärkerem Leib oder starkem Po

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verkürzt bei Kund:innen mit schwachem Po (hüfthohes Tragen möglich)

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung*	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

* nur Kürzen möglich



Leibteil-Länge vorne x cm / hinten x cm (Körpermaß)

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verlängert oder hinten verkürzt bei Kund:innen mit schwachem Po, aber stärkerem Leib


medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verkürzt oder hinten verlängert bei Kund:innen mit starkem Po, aber wenig Leib

Hinweis: Die Differenz zwischen der vorderen und hinteren Leibteil-Länge kann maximal 9 cm betragen.

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

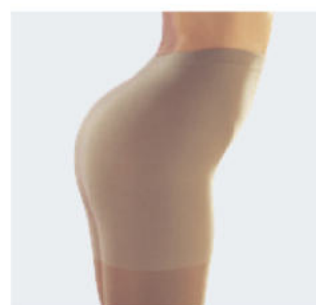

Hose mit offenem Schritt

medi Tipp:

Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Kund:innen mit stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit
- Bei inkontinenten Patient:innen
- Bei Träger:innen von Dauerkathetern
- Bei Kund:innen mit gynäkologischen Mykosen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Hose mit Stoma-Loch

medi Tipp:


Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Stoma-Träger:innen

Bitte beachten Sie:

- Passen Sie bei einer Erstversorgung erst die Hose den Kund:innen an und markieren Sie anschließend die Stoma-Öffnung.
- Schicken Sie zur Einarbeitung der Öffnung die Hose an medi. Auf diese Weise wird sie exakt platziert.
- Schicken Sie bei einer Wiederversorgung bitte die „Vorlage“ mit.

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

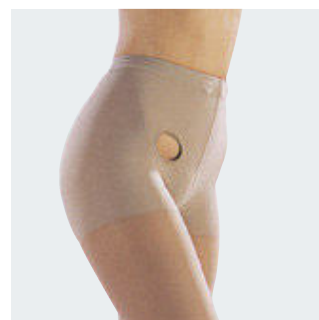

Einbeinhose

medi Tipp:

- Als Alternative zu Hüftbefestigung oder Haftband

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus*	mediven forte*
Serienanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand



mediven® Zwickel-Varianten

Standard-Zwickel	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Komfort-Zwickel	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135	Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110	Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110
Schmäler Zwickel hinten Wenig Bauch und viel Po Bei einem ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch				Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145	Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145
Breiter Zwickel hinten Wenig Bauch und sehr viel Po Bei einem deutlich ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch				Maxi-Leibteil Größe I – III cT 95 – 140 cH 110 – 150	
Extrabreiter Zwickel hinten Viel Bauch und viel Po Bei einem ausgeprägten Po und Bauch				Maxi-Leibteil Größe IV – V cT 120 – 150 cH 135 – 160	
Umstandshose geschlossen Wachsender Bauch Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang				Maxi-Leibteil Größe VI – VII cT 140 – 165 cH 145 – 170	
Herrenhose, Querschlitze Für Herren (mit Eingriff)				Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	


Komfort-Zwickel

Standard-Zwickel

Ausführung Serie	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus* mediven forte*
Größen	I – VII, *I – III
Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Komfort-Zwickel“



vorne

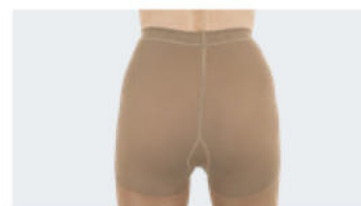

hinten

Schmaler Zwickel hinten

Ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

Ausführung Serie


Qualitäten mediven plus
mediven forte

Größen IV – VII


Ausführung Maß

Qualitäten mediven elegance
mediven comfort
mediven cotton
mediven plus
mediven forte

Bitte bestellen Sie „Schmaler Zwickel hinten“

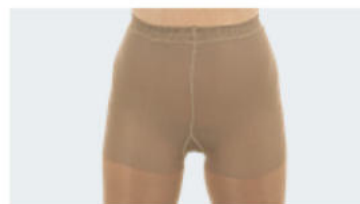

vorne

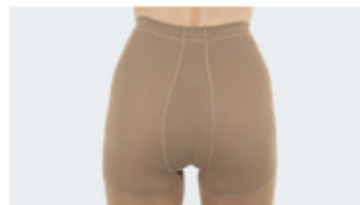

hinten


Schmaler Zwickel vorne

Ausgeprägter Bauch und ein relativ flacher Po.


Ausführung Maß

Qualitäten mediven elegance
mediven comfort
mediven cotton
mediven plus
mediven forte

Bitte bestellen Sie „Schmaler Zwickel vorne“

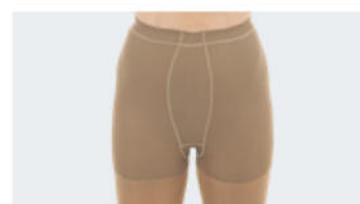

vorne

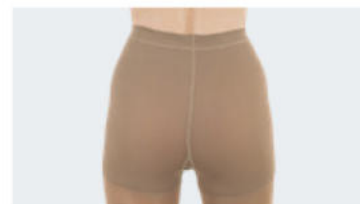

hinten


Breiter Zwickel hinten

Deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.


Ausführung Maß

Qualitäten mediven elegance
mediven comfort
mediven cotton
mediven plus
mediven forte

Bitte bestellen Sie „Breiter Zwickel hinten“

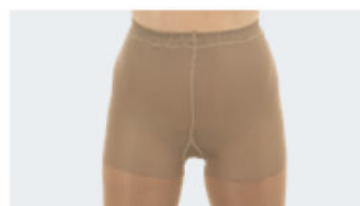

vorne

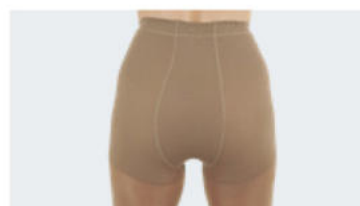


hinten


Breiter Zwickel vorne

Deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Breiter Zwickel vorne“

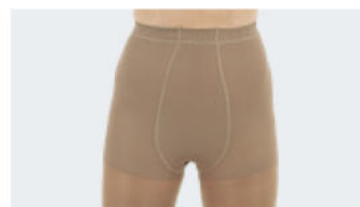

vorne

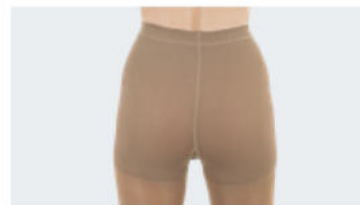


hinten


Variabler Zwickel hinten

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel hinten“

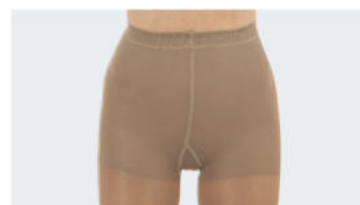

vorne

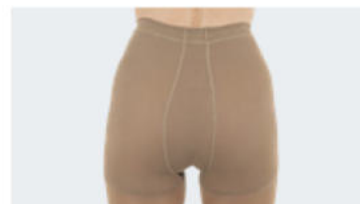


hinten


Variabler Zwickel vorne

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel vorne“

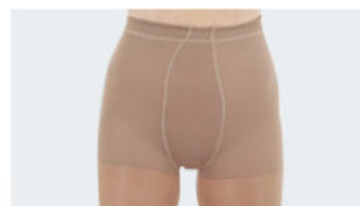

vorne

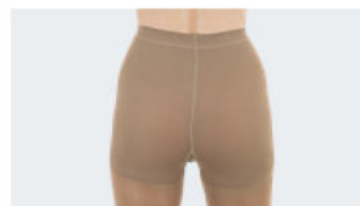


hinten


Durchgehender Zwickel schmal

Empfindlichkeit gegen Druck und leichter Po- und Bauchansatz.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel schmal“

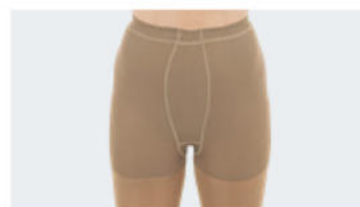

vorne

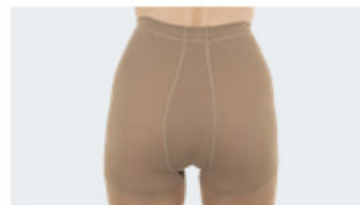


hinten


Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit

Hoher Bauchumfang und ein besonders stark ausgeprägter Po.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit“

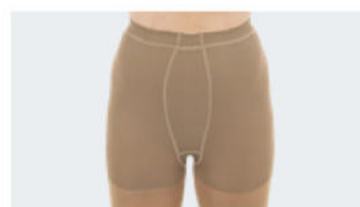

vorne

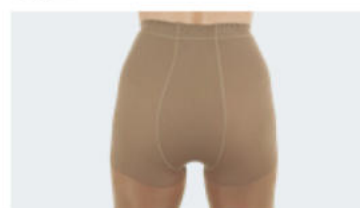

hinten


Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal

Insgesamt hoher Bauchumfang und ein stark ausgeprägter Po.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal“



vorne

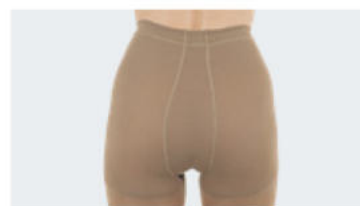


hinten


Durchgehender Zwickel breit

Hoher Bauch- und Hüftumfang.

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel breit“

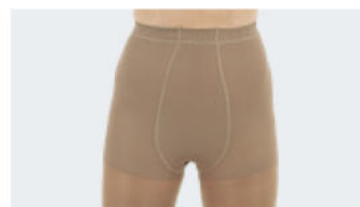

vorne

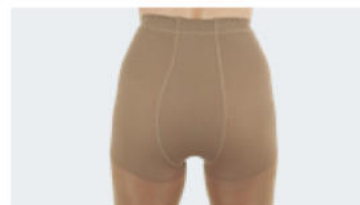


hinten


Maxi-Leibteil

Große Hüft- und Taillenumfänge.

Sonderausführung	
Qualität	mediven plus
Größen	I – VII

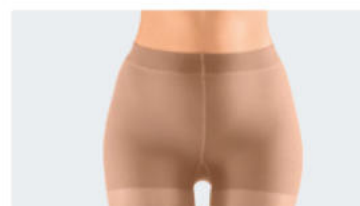

Maxi Leibteil vorne

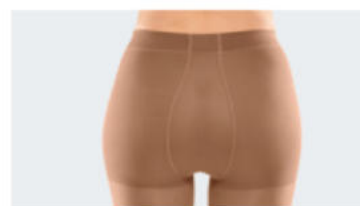

Maxi Leibteil hinten

Umstandshose AT / U, geschlossen

Standard-Zwickel

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang.


- Weicher und anschmiegsamer Zwickel, das Material hebt sich optisch heller ab
- Leibteilverlängerung für besseren Sitz

Ausführung Serie	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Größen	I – VII

Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Umstandshose AT / U, geschlossen“



vorne

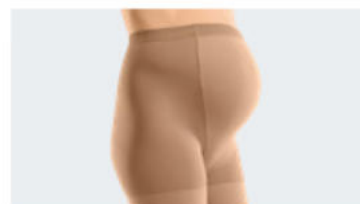

Seite

Umstandshose AT / U, offen

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang und vorhandener Druckempfindlichkeit.

Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
------------	----------------------------------


Ausführung Maß

Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
------------	---

Bitte bestellen Sie „Umstandshose AT / U, offen“



vorne

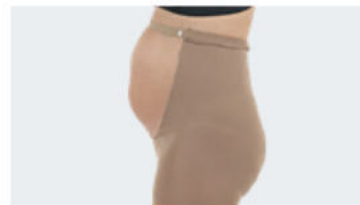

Seite

Herren-Zwickel mit Querschlitze

Geeignet für Herren (mit Eingriff).

Ausführung Serie

Qualitäten	mediven plus
Größen	I – VII

Ausführung Maß

Qualitäten	mediven plus mediven forte
------------	-------------------------------

Bitte bestellen Sie „Herren-Zwickel mit Querschlitze“



vorne



hinten

mediven[®] ulcer kit

Die Versorgung des Ulcus cruris erfordert ein ausgeklügeltes Therapiekonzept. Mit dem mediven ulcer kit können Patient:innen mit offenem Bein effizient behandelt werden. Das ulcer kit besteht aus zwei Komponenten, die übereinander getragen werden: mediven ulcer und mediven ulcer plus. Der Unter- wie auch der Überstrumpf haben jeweils 20 mmHg und sorgen somit Tag und Nacht für eine therapeutisch effektive Kompressionstherapie.

Mehr zum medi Therapiekonzept Ulcus cruris erfahren Sie in unserem Produktkatalog, Seite 4.





mediven
ulcer kit

mediven[®] ulcer kit

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

medi Tipp*:

Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven ulcer kit für:

- Frauen / Männer
- Nach initialer Entstauungsphase
- 24-stündige Kompressionstherapie

Indikationen

- Therapie des Ulcus cruris venosum (CEAP-Klassifikation C6)
- Therapie des Ulcus cruris venosum-Rezidivs (CEAP-Klassifikation C6r)
- Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen)
- Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs (CEAP-Klassifikation C5)

Eigenschaften

- Bereits nachts therapeutisch wirksam^{1,2}
- Einfaches Anlegen: Unterstrumpf erleichtert das Anziehen des Überstrumpfes³
- Geruchshemmende Wirkung im Unterstrumpf für optimale Hygiene
- mediven ulcer sollte aus hygienischen Gründen täglich gewechselt werden, zwei Unterstrümpfe standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Angenehmes Tragegefühl bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen der EWMA** hinsichtlich des therapeutisch notwendigen Drucks (40 mmHg)⁴
- Hohe Wandstabilität dank doppeltem Strumpf

Waschanleitung

Unterstrumpf:    

Überstrumpf:    

für Waschmaschine und Trockner geeignet



Hinweis

Ein anschauliches Video zum Anlegen des mediven ulcer kits finden Sie hier: www.medi.biz/ulcerkit

Material-Zusammensetzung

mediven ulcer	mediven ulcer plus
73 % Polyamid	75 % Polyamid
27 % Elastan	25 % Elastan

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

¹ Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebology 2008;23(1):40-46.

² Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245-250.

³ Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. Nursing Standard 2015;30(8):57-63.

⁴ Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer Challenges and Current Best Practice. J Wound Care 2016;25 Suppl 6:1-67.

** European Wound Management Association

mediven® ulcer kit

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

Unterstrumpf mediven® ulcer

Therapeutisch effektive
Kompression mit 20 mmHg
während der Nacht.^{1,2}

Flacher Abschlussrand
gibt sicheren Halt und
schnürt nicht ein.

Weiches Material mit
antibakteriellem Effekt
sorgt für angenehmen
Tragekomfort und einfaches
Anziehen.

Eingestrickter Ristbereich
ermöglicht eine optimale
Passform und reduziert die
Faltenbildung bei
angewinkeltem Fuß.

Spezielle Fersenkonstruktion
bietet optimale Druck-
entlastung und Farb-
markierung zur einfachen
Positionierung.

Überstrumpf mediven® ulcer plus

Zusätzliche 20 mmHg
Kompression während
des Tages.

Breites Abschluss-
bündchen gewähr-
leistet optimalen
Tragekomfort.

Mittlere Materialstärke
sorgt für angenehmen
Arbeitsdruck und eine
dezenzte Optik.

Komfortable Plus-Ferse
und zuverlässige
Sohlenverstärkung
ermöglicht eine hohe
Strapazierfähigkeit.

Auch mit
geschlossener
Fußspitze
erhältlich.

mediven ulcer kit®

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

Lieferumfang

- 2 mediven ulcer Unterstrümpfe
- 1 mediven ulcer plus Überstrumpf
- 1 Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze (bei mediven ulcer kit mit offener Fußspitze)

mediven ulcer kit		
	AD	AD
		
	Geschlossene Fußspitze	Offene Fußspitze
Serie 2 x 20 mmHg	17.06.08.1004	17.06.08.1004


mediven® ulcer refill

Artikel	VE	Hilfsmittelnummer
mediven ulcer refill Nachfüllpack	2 x mediven ulcer	17.99.99.2024

Artikel	Artikelnummer	
Geschlossene Fußspitze	kurz	normal
mediven ulcer kit	381708Δ000	381008Δ000
Offene Fußspitze		
mediven ulcer kit	381707Δ000	381007Δ000
Nachfüllpack (je VE 2 Stück)		
mediven ulcer refill	8X4718Δ000	8X4018Δ000

Δ = Bitte die Größe von 1–7 ergänzen

Maßstabelle

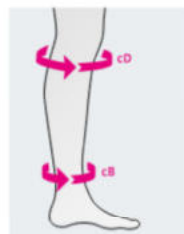

Größe		I	II	III	IV	V	VI	VII
Umfänge (in cm)	Fessel cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	unter Knie cD	27–33	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50
Farbmarkierung	Ferse	Rosa	Blau	Gelb	Rot	Grau	Grün	Braun
		Kurz	Normal					
Länge (in cm)	ℓD	34–38	39–44					

Kompression

2 x 20 mmHg

Produktvorteile



Weich *



Clima Fresh



Easy donning



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

* Diese Merkmale gelten nur für den mediven ulcer Unterstrumpf.

Farben

S = Serie

Caramel
S



mediven ulcer kit mit geschlossener Fußspitze

Studien

- ¹ Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebologie 2008;23(1):40-46.
- ² Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245-250.





Basisversorgungen von medi

Der medizinische Hilfsmittelmarkt befindet sich im Wandel. Schon heute müssen Sie als Leistungserbringer beispielsweise bis zu zwei aufzahlungsfreie medizinische Kompressionsstrümpfe als Basisversorgung bereithalten. medi bietet Ihnen dafür die ideale Lösung. Mit dem duomed basic und dem Maxis MICRO bieten Sie Ihren Kund:innen aufzahlungsfreie Produkte mit solider Produktqualität. Die Strümpfe erhalten Sie in allen wichtigen Varianten als Serien- und Maßversorgung.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit medi ermöglicht es Ihnen, auf alle Kundenbedürfnisse einzugehen und das komplette Sortiment aus aufzahlungsfreien Produkten, mediven Qualitätsprodukten sowie individuellen Premium-Zusätzen abzudecken. Erhalten Sie von medi alles einfach aus einer Hand.

duomed[®] basic

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir duomed basic für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Blickdichtes Gestrick

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet



Noppen-Haftband

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



**STANDARD
100**
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Caramel
S + M

Schwarz
S + M

Lieferbare Varianten

	AD	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0110	17.06.03.0097	17.06.04.0102	17.06.04.0102
Serie CCL 2	17.06.01.1176	17.06.03.1203	17.06.04.1172	17.06.04.1172
Maß CCL 1	17.06.10.0078	17.06.12.0071	17.06.13.0068	17.06.13.0068
Maß CCL 2	17.06.10.1122	17.06.12.1113	17.06.13.1111	17.06.13.1111

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführung	nicht möglich	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband
	AG	Noppen-Haftband
Zwickel / Leibteil	AT	Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	58 %	42 %
CCL 2	55 %	45 %

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
AG mit Haftband weit	cG	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße 	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35
Längenmaße 	ℓG normal	72 – 83 cm						
	ℓG kurz	62 – 71 cm						
	ℓD normal	39 – 44 cm						
	ℓD kurz	34 – 38 cm						
		Fußteile hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36 – 43						

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir Maxis MICRO für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig
- Leichte Ödemneigung
- Straffes Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C3 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft


Eigenschaften

- Transparentes Gestrick

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und Trockner geeignet

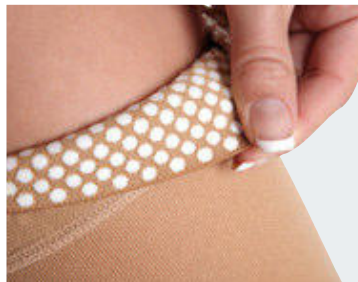

Noppen-Haftband

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



**STANDARD
100**
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Bronze
S + M

Schwarz
S + M

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0082	–	17.06.03.0076	17.06.04.0079	17.06.04.0079
Serie CCL 2	17.06.01.1132	–	17.06.03.1119	17.06.04.1112	17.06.04.1112
Maß CCL 1	17.06.10.0053	17.06.11.0043	17.06.12.0052	17.06.13.0050	17.06.13.0050
Maß CCL 2	17.06.10.1078	17.06.11.1048	17.06.12.1076	17.06.13.1068	17.06.13.1068

Standard-Ausführungen


Serie	Größe 2 – 7, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand AG Noppen-Haftband
Zwickel / Leibteil	AT Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Unifußgröße

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	67 %	33 %
CCL 2	62 %	38 %

Seriengröße ohne Naht

		2	3	4	5	6	7
AG mit Haftband normal		44 – 51	48 – 55	52 – 59	55 – 63	59 – 67	63 – 70
AG mit Haftband weit		52 – 61	56 – 66	60 – 71	64 – 76	68 – 81	71 – 83
ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße	cG	44 – 61	48 – 66	52 – 71	55 – 76	59 – 81	63 – 83
	cF	40 – 50	43 – 54	46 – 58	49 – 63	52 – 66	56 – 70
	cE	32 – 39	34 – 42	36 – 44	38 – 47	40 – 50	41 – 52
	cD	28 – 35	31 – 38	33 – 41	35 – 44	37 – 47	39 – 49
	cC	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cB1	23 – 29	25 – 31	28 – 34	30 – 36	32 – 38	35 – 40
	cB	19 – 21	21 – 23	23 – 25	25 – 27	27 – 29	29 – 31
	cY	27 – 32	28 – 34	30 – 36	31 – 37	32 – 40	34 – 42
	cA	18 – 23	20 – 25	22 – 28	24 – 31	26 – 33	27 – 34
	cH	110		120		130	
Leibteil- maße Längenmaße	cT	80		90		100	
	ℓG normal	72 – 83					
	ℓG kurz	62 – 71					
	ℓD normal	39 – 44					
	ℓD kurz	34 – 38					

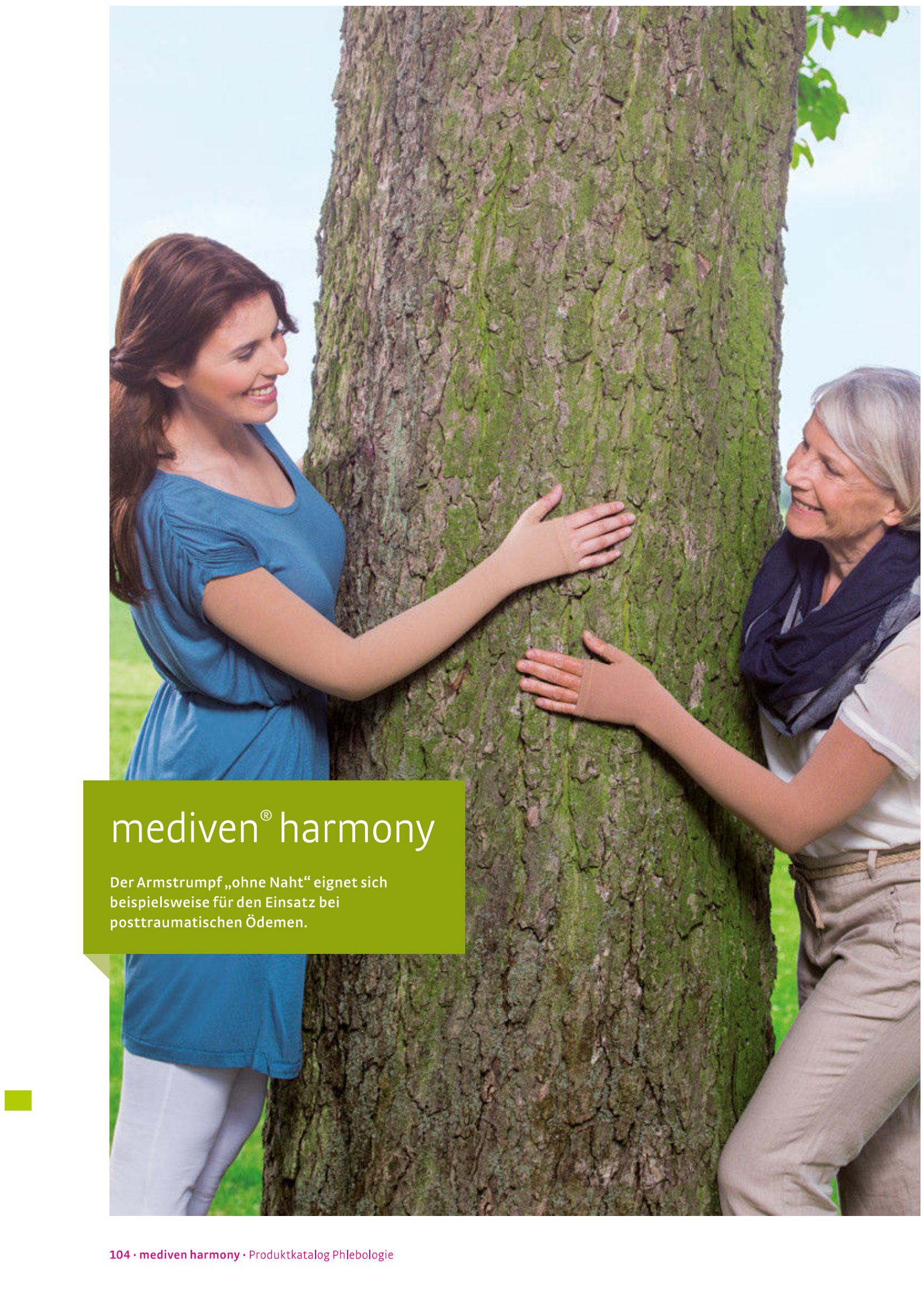A photograph of two women, one younger with long brown hair and one older with short grey hair, both smiling and hugging a large tree trunk covered in moss. They are wearing light-colored, seamless arm sleeves. The background is a bright, sunny outdoor setting with green grass and a clear sky.

mediven® harmony

Der Armstrumpf „ohne Naht“ eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei posttraumatischen Ödemen.



mediven® harmony

Rundgestrickter Armstrumpf in sieben Seriengrößen

Indikationen

- Armvenenthrombose
- Postoperative und posttraumatische Ödeme (Hinweis: nicht für ausgeprägte Ödeme geeignet!)


Handteil:

- Wirkt der Ödembildung im Handbereich entgegen während des Tragens eines medizinischen Kompressionsstrumpfes für den Arm

Eigenschaften

- Doppelte Ellipse im Bereich des Ellenbogens und der Ellenbeuge für verminderte Faltenbildung in der Ellenbeuge, dadurch Verhinderung von Einschnürung, Druckstellen, Hautreizungen, Hautverletzungen im Beuge-sehnenbereich und der vaskulären Strukturen
- Gewährleistung der Gelenkfunktionalität
- UV-Schutzfaktor 80
- Lanolin-Ausrüstung¹

Handteil mediven® harmony SL

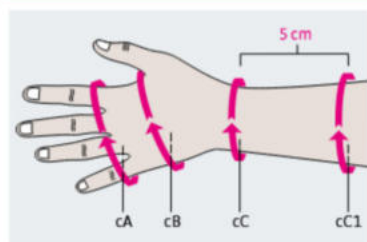

Lieferbare Varianten

AC1-Handteil
ohne Finger, mit Daumenansatz



Nahtloses
Handteil

17.99.99.2011

Material-Zusammensetzung Handteil

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	82 %	18 %
CCL 2	78 %	22 %

* Maßpunkt CC1 befindet sich 5 cm oberhalb von CC



Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Umfang / Handteil (cm)

Größen	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15,0–18,0	17,0–20,0	19,0–21,5	21,0–23,5	23,0–26,0	25,5–30,0
cC	13,5–15,5	15,0–18,0	17,0–20,0	19,0–21,0	20,0–23,5	22,5–27,5
cB	15,5–20,0	17,5–21,0	19,5–23,0	20,5–24,0	22,5–26,0	24,5–30,0
cA	15,0–19,0	17,0–20,0	19,0–22,0	20,0–23,0	22,0–25,0	24,0–29,0

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen²


Die medi Pflegeprodukte für Haut und
Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

² Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

Produktvorteile

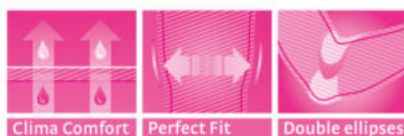

Clima Comfort

Perfect Fit

Double ellipses



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



STANDARD
100
97.0.3231
Hohenstein HTTI



dermatest-
garantie.de

Kompressionsklasse

CCL 1, 2


Farben

S = Serie

Sand
S

Caramel
S

Armstrumpf

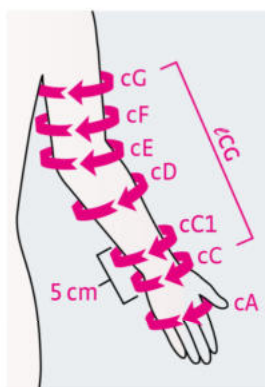

Maßpunkte mediven harmony

Standard-Ausführungen

Farben	Sand, Caramel
Seriengrößen	I – VII, Standard und Extraweit
Maßanfertigung	nicht möglich
Abschluss	Noppen-Haftband schmal, 2,5 cm
Handteil	ohne Finger, mit Daumenansatz

Material-Zusammensetzung

Armversorgung	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	66 %	34 %
CCL 2	57 %	43 %

Länge (cm)

Standardlänge 41 – 47

Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Standard und Extraweit)

AG-Armstrumpf mit integriertem
Handteil und Haftband-Abschluss

CG-Armstrumpf mit
Haftband-Abschluss



Standard CCL 1: 17.10.01.0013
CCL 2: 17.10.01.1017
Extraweit CCL 1: 17.10.01.0013
CCL 2: 17.10.01.1017

Standard CCL 1: 17.10.01.0014
CCL 2: 17.10.01.1019
Extraweit CCL 1: 17.10.01.0014
CCL 2: 17.10.01.1019

Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
cE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
cD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
cC1 = 100 %	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
cA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	
Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII			
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit		
cG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5		
cF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0		
cE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0		
cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5		
cC1 = 100 %	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5			
cC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5			
cA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0			





medi travel[®] Reisestrümpfe

Menschen mit gesundem Venensystem denken bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen nicht sofort an Thromboseprophylaxe. Doch das ist bei langen Autofahrten oder im Flugzeug besonders wichtig. Reisestrümpfe gehören auf jede Reise-Checkliste. Sie können das Risiko einer Reisetrombose reduzieren¹.

Integrieren Sie das Thema Thromboseprophylaxe auf Reisen in Ihre Kundengespräche und empfehlen Sie die medi travel Reisestrümpfe – als gesunden Urlaubsbegleiter für fitte Beine.

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

medi travel[®] men

Der sportliche Reisesstrumpf für IHN

Eigenschaften

- Blickdichter Kniestrumpf in attraktiver Rippenoptik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisthrombose reduzieren¹
- Besonders weiches Material mit verstärkter Sohle
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet

Lieferbare Varianten

AD



Länge normal und kurz



Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.

Größenermittlung

Umfang	Größe
18 – 20 cm	S
20 – 23 cm	M
23 – 26 cm	L
26 – 29 cm	XL
29 – 32 cm	XXL
Fesselmaß	



Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fesselumfanges.

Standard-Ausführungen

Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 38 – 48
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (43 – 49 cm) und kurz (37 – 42 cm)

Material-Zusammensetzung

Polyamid (PA)	Elastan (EL)
90 %	10 %

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

Produktvorteile



Clima Comfort



Perfect Fit

Hightech-Faden

Höchste Längs- und Quere-
elastizität sorgt für optimalen
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach
Oeko-Tex Standard 100



**STANDARD
100**
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



medi travel entspricht allen anzuwendenden EU-Richtlinien. Alle vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.

Farben

S = Serie

Schwarz
S

Anthrazit
S



medi travel[®] women

Der modische Reisestrumpf für SIE

Eigenschaften

- Kniestrumpf in semitransparenter Optik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisthrombose reduzieren¹
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Clima Fresh mit geruchshemmender Wirkung
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig

Waschanleitung

Pflegeleicht    

für Waschmaschine und

Trockner geeignet

Lieferbare Varianten

AD




Umfang	Größe
18 – 20 cm	S
20 – 23 cm	M
23 – 26 cm	L
26 – 29 cm	XL
29 – 32 cm	XXL



Fusselmaß

Länge normal und kurz

Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.

Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fusselmaßes.

Standard-Ausführungen

Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 36 – 43
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (39 – 44 cm) und kurz (34 – 38 cm)

Material-Zusammensetzung

Polyamid (PA)	Elastan (EL)
75 %	25 %

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit

Hightech-Faden

Höchste Längs- und Quere-
elastizität sorgt für optimalen
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach
Oeko-Tex Standard 100



**STANDARD
100**
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI




medi travel
entspricht allen
anzuwendenden
EU-Richtlinien.
Alle vorgeschrie-
benen Konformi-
tätsbewertungs-
verfahren wurden
durchgeführt.

Farben

S = Serie

Schwarz
S

Caramel
S

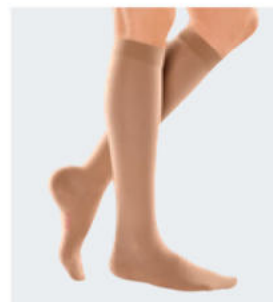





medi Zubehör

medi bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen für den Rund- und Flachstrick-Bereich auch ergänzende Produkte. Gerade die Haut sehnt sich in der Kompressionstherapie nach besonderer Pflege. Ihre Kund:innen sprechen von juckender oder trockener Haut? Empfehlen Sie die Pflegeprodukte von medi. Sie sind speziell auf Venen- und Ödempatient:innen abgestimmt und verwöhnen die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Pflegeprodukte für Kompressionsstrümpfe schonen das Gestrick und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Strumpfes.

Ihre Kund:innen benötigen Hilfe beim Anziehen ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe? Es gibt unterschiedliche An- und Ausziehhilfen, die den täglichen Umgang mit den medizinischen Kompressionsstrümpfen wesentlich vereinfachen.

medi Hautpflege

**Bieten Sie Ihren Kund:innen mehr.
Zum Beispiel streichelzarte Haut
in der Kompressionstherapie**

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonisieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.

Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venentherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

Wichtiger Tipp für Allergiker:innen

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.



**medi Pflegeprodukte sind Kosmetik-
produkte und dürfen nur auf intakter
Haut angewendet werden.**

medi day® – kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6 Stück	P400025000
medi day, 150 ml Tube	6 Stück	P400026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi day®

medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6 Stück	P500025000
medi night, 150 ml Tube	6 Stück	P500026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi night

medi fresh – erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6 Stück	P900026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi fresh

medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6 Stück	P800026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi soft

Hinweis

medi soft ist für Diabetiker:innen geeignet. Dose ist zu 100 % recycelt (ausgenommen Sprühkopf, Kappe und Etikett).

medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv.

Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6 Stück	P920026000



medi clean

medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6 Stück	P930005000



medi spot ex

medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585000



medi Wäschenetz

An- und Ausziehhilfen für Strümpfe und Socken

medi 2in1

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000



medi 2in1

medi Butler Off

Schnelles und einfaches Ausziehen von Strümpfen, Socken und medizinischen Kompressionsstrümpfen, ohne Bücken. Nicht empfohlen für mediven forte.

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Butler Off	1 Stück	6900362000



Ausziehhilfe medi Butler Off

medi Handschuhe

medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestrücke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	S	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	M	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	L	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	S	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	M	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	L	12 Paar / Karton	6901124000



Gummihandschuhe

medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestrücke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex


Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	S	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	M	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	L	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	S	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	M	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	L	12 Paar / Karton	6903124000



Textilhandschuhe mit Latex

Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.

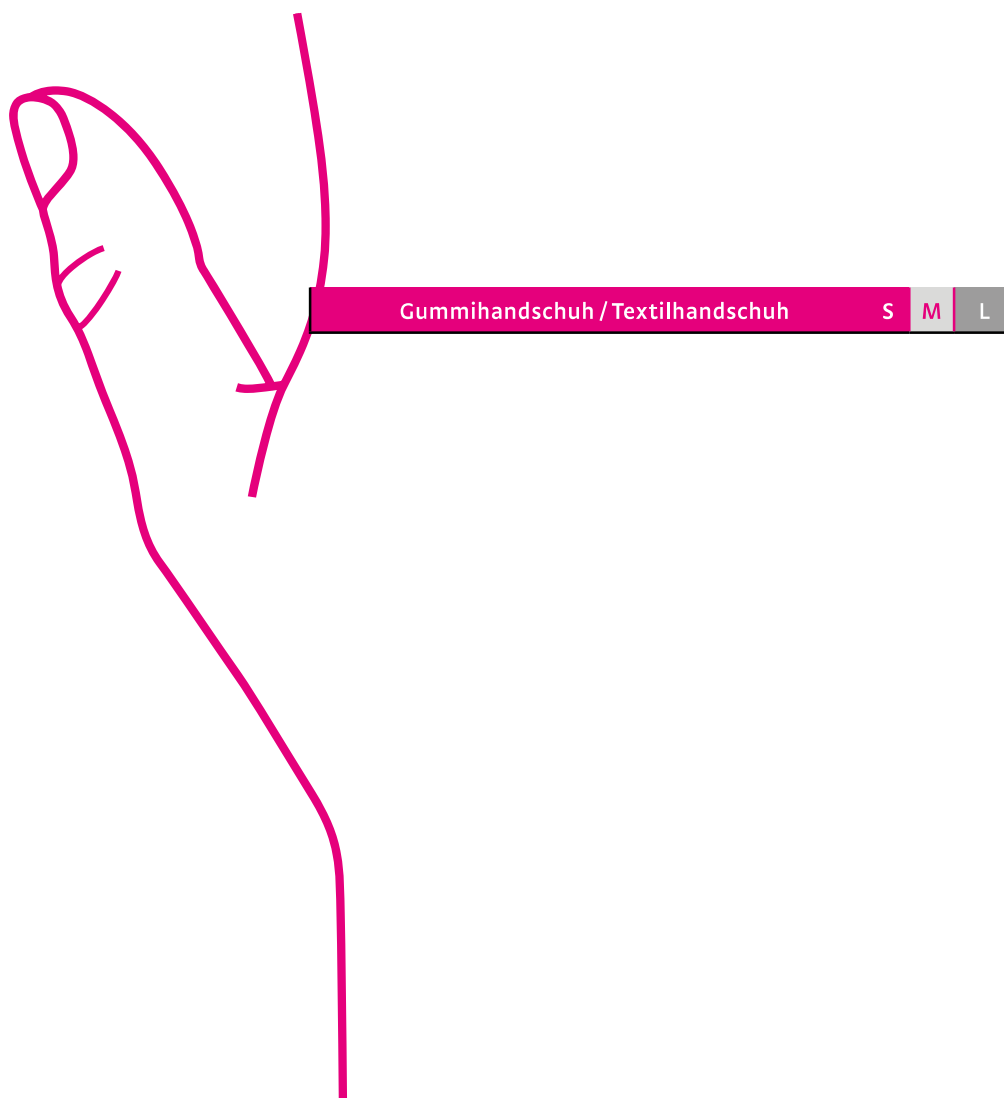

Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002000
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022000



Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

medi Butler

Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe

Indikationen¹

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen

medi Tipp:

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von MKS. Sie ermöglichen insbesondere Patient:innen mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.¹

medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052000

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Lang-Griff Butler


¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 08.07.2025).

medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102000

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

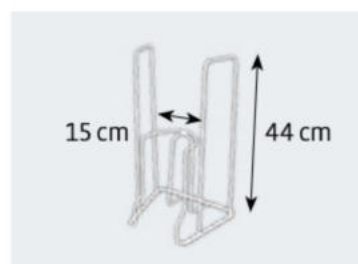


medi Big Butler

medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051000

Für Patient:innen mit Bewegungseinschränkung, Griffhöhe individuell einstellbar

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

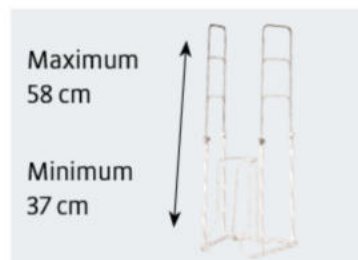


medi Vario-Griff Butler

medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055000

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

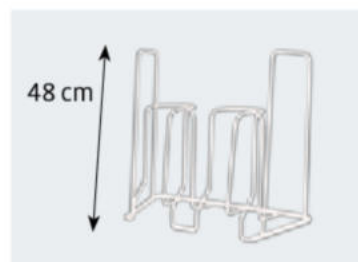

medi Hosen Butler

medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057000

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die Mithilfe dritter Personen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Arm Butler

medi Tipp:

Eine Studie¹ belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Proband:innen nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

¹ Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49(2):221-229.

Therapiehilfen

medi fix

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6 Stück	1023025000



medi fix Soft-Roller

medi Erstausrüstungspakete (EAP)

Kartonage mit bedrucktem Einschub befüllt mit:

- Anschreiben
- Kundenantwortkarte
- Broschüre „Alles Wissenswerte zum Kompressionsstrumpf“
- Broschüre „Mein Wegweiser bei Lip- oder Lymphödem“
- Je ein 8 ml Sachet: medi day, medi night, medi clean, medi mini soft Schaum 15 ml
- Handschuhe in unterschiedlichen Größen und Ausführungen

Ausführung mit Gummihandschuhen

Artikel	VE	Größe	Art.-Nr.
EAP mit Gummihandschuhen	1 Stück	S	1022560000
EAP mit Gummihandschuhen	1 Stück	M	1022561000
EAP mit Gummihandschuhen	1 Stück	L	1022562000

EAP mit Gummihandschuhen	5 Stück	S	1023560000
EAP mit Gummihandschuhen	5 Stück	M	1023561000
EAP mit Gummihandschuhen	5 Stück	L	1023562000

Ausführung mit Textilhandschuhen

Artikel	VE	Größe	Art.-Nr.
EAP mit Textilhandschuhen	1 Stück	S	1022570000
EAP mit Textilhandschuhen	1 Stück	M	1022571000
EAP mit Textilhandschuhen	1 Stück	L	1022572000

EAP mit Textilhandschuhen	5 Stück	S	1023570000
EAP mit Textilhandschuhen	5 Stück	M	1023571000
EAP mit Textilhandschuhen	5 Stück	L	1023572000



medi Erstausrüstungspaket mit Gummihandschuhen



medi Erstausrüstungspaket mit Textilhandschuhen

* Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de





Service

Profitieren Sie von unseren Online-Services als einfache und effektive Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag: Mit webbasierten Tools und passgenauen Angeboten heben wir die digitale Versorgungswelt stets auf ein neues Level – für höhere Kundenzufriedenheit, optimierte Abläufe und mehr Lebensqualität.

medi vision – der digitale Assistent

So flexibel wie Ihr Alltag


Vom Maßnehmen bis zur Bestellung – mobil oder im Sanitätshaus:
Entscheiden Sie selbst, wie medi vision Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt.



Eine App für Rund- und Flachstrick.
Einfach und effektiv zur passenden mediven Kompressionsversorgung.



Digitales Maßblatt – bequem und übersichtlich ausfüllen.
Per Handeingabe, mit Apple Pencil oder über 3D-Scan.

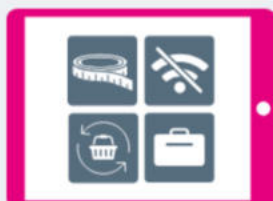

Erst Maßnehmen, später bestellen.
Im Fachhandel und unterwegs flexibel einsetzbar.



Zufriedene Kund:innen durch moderne Beratung.
Angenehm, hygienisch und individuell versorgen.

Lieblingsfunktionen aus dem Fachhandel



„Die manuellen Eingabemöglichkeiten der Maßdaten bei medi vision sind großartig und einfach zu handhaben! So kann ich die Maßdaten direkt digital eintragen sowie Übertragungs- und Schreibfehler vermeiden.“

Anja Scholz,
Fachkraft im Sanitätshaus Scholz



„Ich mag die Scan-Funktion bei medi vision am liebsten, da ich damit die Hautmaße meiner Patient:innen komfortabel und ergonomisch aufnehmen kann. Dabei ist meine Fachkompetenz weiterhin von großer Bedeutung: Ich kann selbst entscheiden, wo die einzelnen Maßpunkte gesetzt und angepasst werden müssen.“

Michaela Löser, Fachkraft im Sanitätshaus Rulitschka

Neugierig?
Scannen Sie den QR-Code oder kontaktieren Sie Ihre medi Handelsvertretung Compression.



medi.biz/vision

Werbung

medi Marketing-Center

Bestellen Sie kostenfrei aufmerksamkeitsstarke Dekoration im medi Marketing-Center.



medi Bilder-Pool

Neutrale Produktfotos und attraktive Imagebilder für Ihren digitalen Auftritt bietet der medi Bilder-Pool.



medi Fachhandelsportal

Im medi Fachhandelsportal finden Sie verbraucherorientierte Marketing-Konzepte, bei denen die Kund:innen im Mittelpunkt stehen (zum Beispiel das bewährte Kundenbindungskonzept etc.).



Bestellung

medi e-shop

Bequem und flexibel konfigurieren, bestellen und retounieren. Rund um die Uhr. Einfach und unkompliziert.



Digitales Retourenmanagement

Organisieren Sie Ihre Rücksendungen und Anfragen bei Versorgungen jetzt noch effizienter und profitieren Sie – denn in vielen Fällen entfällt die Rücksendung.



After-sales

medi Erinnerungsservice

Mit dem medi Erinnerungsservice denken Ihre Kund:innen zuverlässig an ihre Wiederversorgung mit Kompressionsstrümpfen.



Kennen Sie schon unsere kostenlosen Newsletter?

Bleiben Sie jederzeit zu Fach- und Service-Themen sowie Produkt-Highlights von medi auf dem Laufenden – kostenlos, gebündelt und aktuell! Mit den medi Newslettern erhalten Sie wertvolles und praktisches Know-how für Ihren Arbeitsalltag. Spannende Einblicke bieten Interviews mit Fachhändlern, Patient:innen, Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen.

Unsere Newsletter für Sie in der Übersicht:

medi for you


- ✓ Für Führungs- und Fachkräfte im Sanitätsfachhandel
- ✓ Das erwartet Sie: Fach-Interviews, Gesundheitswissen, Produktneuigkeiten aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und Footcare sowie Branchen-News
- ✓ Sechsmal jährlich

Kostenlose Anmeldung: medi.biz/mfy

medi Lymph-News

- ✓ Für alle, die Lymphpatient:innen versorgen und fachlich begleiten
- ✓ Das erwartet Sie: Experten-Interviews und Gast-Beiträge von Lymphspezialist:innen, Produktneuigkeiten und Versorgungskonzepte sowie aktuelle Informationen aus der Gesundheitspolitik
- ✓ Viermal jährlich

Kostenlose Anmeldung: medi.biz/lymph-news

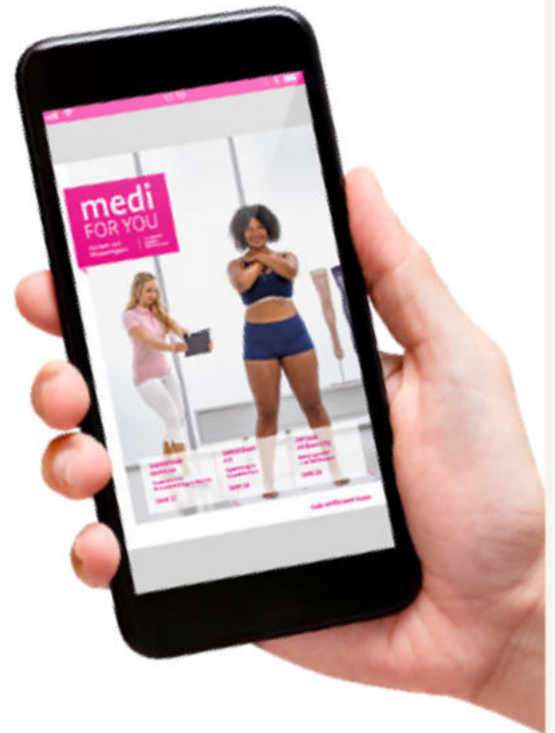

Arbeitsmaterialien für Sie

Nutzen Sie unsere Maßblöcke, um Ihre Patient:innen passgerecht zu versorgen.

circaid®



Bestellblock Serie
circaid
Art.-Nr. 0050549
DIN A4

Rundstrick



Bestellblock Serie
Rundstrick
Art.-Nr. 0020730
DIN A4



Bestellblock Maß
Rundstrick
Art.-Nr. 0020733
DIN A4



Maßstabellenset
Phlebologie
Art.-Nr. 0020320
Kitteltaschenformat

Aufklärung für Patient:innen

Ausführliche Informationen rund um den Kompressionsstrumpf



Alles Wissenswerte
zum Kompressions-
strumpf
Art.-Nr. 0020624
DIN A5



Broschüre
medi travel
Art.-Nr. 0022721
DIN lang

medi Campus Weiterbildungsangebot

Wissen – Können – unternehmerischer Erfolg

Bei über 500 erfolgreich durchgeführten Seminartagen vermittelt der medi Campus täglich Wissen durch erfahrene Trainer:innen und Coaches. Die medi Weiterbildungsangebote stehen für langfristigen, unternehmerischen Erfolg, denn eine Investition in Wissen und Kompetenz bringt noch immer die besten Zinsen.

Gerne steht Ihnen unser Team unter T +49 921 912-2020 oder seminare@medi.de zur Verfügung und berät Sie bei der Auswahl des für Sie passenden Seminars.

Für alle medi Seminare können Sie sich ganz einfach online anmelden unter:
www.medi.biz/campus





Unser medi Kundencenter ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-111

Oder per E-Mail: OrderPhlebologie@medi.de

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de

